

WatchPAT[®] ONE

Test monouso per la diagnosi domiciliare delle apnee del sonno

Per istruzioni video dettagliate
visitare:

watchpatone-howtouse.com

WatchPAT[®] ONE

Test monouso per la diagnosi domiciliare delle apnee del sonno



Etichettatura delle specifiche tecniche

Rx only Attenzione: la legge federale limita la vendita di questo dispositivo a un professionista sanitario autorizzato o dietro prescrizione medica

Monouso, non riutilizzare

Limite di temperatura: 0 °C - 40 °C

Fare riferimento alle istruzioni per l'uso

1.5V DC Tensione di esercizio della batteria

IP22 Protezione da agenti esterni

Parte applicata di tipo BF

FCC ID
ZAPUBWPONE Numero di identificazione della Federal Communications Commission

Produttore del dispositivo medico

REF Numero di catalogo

SN Numero di serie

Data di fabbricazione

Data di scadenza

CE Il prodotto è contrassegnato dal logo CE 2797 per BSI

EC REP Rappresentante autorizzato per l'Unione Europea

Secondo la Direttiva RAEE 2012/19/UE, tutti i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) devono essere raccolti separatamente e non smaltiti insieme ai normali rifiuti domestici. Smaltire questo prodotto e tutte le sue parti in modo responsabile ed ecologico.

Fragile, maneggiare con cautela

Mantenere asciutto

Per eventuali domande è possibile
contattare l'Help Desk di
Itamar[®] Medical al numero:
1-888-748-2627

itamar[®]
medical
www.itamar-medical.com

Istruzioni dettagliate

Leggere il codice QR riportato in
basso per scaricare l'applicazione
WatchPAT[®] ONE.



Download on the
App Store



ANDROID APP ON
Google play

itamar[®]
medical
www.itamar-medical.com



Note importanti:

- Temperature di conservazione e di funzionamento: 0 °C - 40 °C
- Non tentare di collegare o scollegare le parti dell'unità.
- Non tentare di introdurre corpi estranei nell'unità.
- Non provare in alcun caso a risolvere un problema da soli.
- Il dispositivo WatchPAT[®] ONE non deve causare disagio o dolore. In caso di disagio insopportabile, rimuovere il dispositivo e chiamare l'Help Desk.

Itamar Medical Ltd.
9 Halamish Street, PO box 3579
Caesarea Ind. Park, 3088900 Israele
T: +972-4-6177000, F: +972-4-6275598

EC REP Arazy Group GmbH
The Squire 12, Am Flughafen,
Typische Messanordnung60549
Frankfurt am Main,
Germany

Per istruzioni video dettagliate,
visitare: watchpatone-howtouse.com



REF: DM2193470 - Edition 2

WatchPAT® ONE

Test monouso per la diagnosi domiciliare delle apnee del sonno

Istruzioni dettagliate


Queste istruzioni dettagliate mostrano come usare correttamente il test per la diagnosi domiciliare delle apnee del sonno WatchPAT® ONE.

Prima di applicare WatchPAT® ONE:

- ✦ Si consiglia di applicare il dispositivo WatchPAT® ONE alla mano non dominante.
- ✦ La sonda può essere indossata su qualsiasi dito ad eccezione del pollice.
- ✦ Prima dell'uso, rimuovere indumenti stretti, anelli, orologi e altri gioielli.
- ✦ Rimuovere l'eventuale smalto o unghia finta dal dito scelto per l'esame e assicurarsi che l'unghia sia tagliata corta.

Nota: utilizzare solo batterie AAA alcaline.
Non inserire la batteria fino al momento di andare a letto.

1. Prima di procedere con lo studio del sonno, assicurarsi di disporre di accesso a Internet, telefono, dispositivo WatchPAT® ONE e numero PIN.

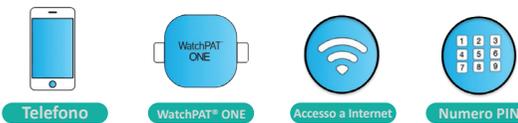

2. Scaricare sul proprio smartphone l'applicazione WatchPAT® ONE (disponibile su Apple App Store e Google Play Store).



3. Aprire l'applicazione WatchPAT® ONE e consentire tutte le autorizzazioni richieste dall'applicazione e necessarie per il suo funzionamento.


Estrarre il dispositivo WatchPAT® ONE dalla confezione. È possibile fare clic sul pulsante "Anteprima" nell'applicazione per ricevere un tutorial rapido su come configurare il dispositivo.

ANTEPRIMA


Al termine, premere il pulsante "Pronto".

PRONTO

4. Inserire la batteria nel dispositivo WatchPAT® ONE.

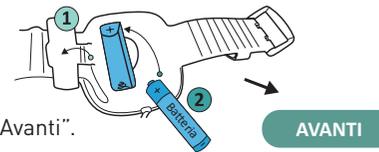


5. Rimuovere l'orologio ed eventuali gioielli dalla mano scelta per il test.

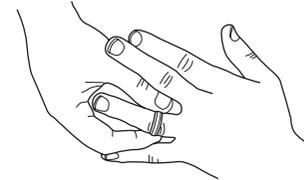

6. Inserire il codice PIN di 4 cifre ricevuto dallo studio dal proprio medico o professionista sanitario e premere "Invio".



7. Indossare il dispositivo WatchPAT® ONE sulla mano non dominante. Assicurarsi che non sia troppo stretto né troppo largo.

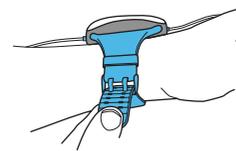


8. Far passare il cavo del sensore toracico (sensore per il russamento e la posizione del corpo) attraverso la manica, facendolo uscire dall'apertura del collo. Rimuovere la linguetta dall'adesivo e applicare il sensore subito sotto l'incavo sovrasternale.



* Se il dispositivo WatchPAT® ONE non include il sensore toracico, saltare questo passaggio.

9. Inserire la sonda completamente su un dito della mano non dominante. È possibile scegliere qualsiasi dito ad eccezione del pollice. Inserire la sonda in modo che l'adesivo contrassegnato con TOP sia posizionato sopra l'unghia. Tenere la sonda contro una superficie rigida e tirare lentamente la linguetta TOP verso di sé per rimuoverla dalla sonda.

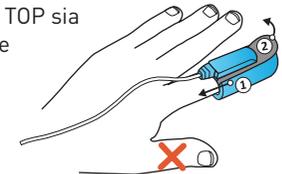

10. L'installazione è completata. Ultimi passaggi prima di iniziare lo studio del sonno:

- a. Assicurarsi che il telefono non si trovi a più di 5 metri/15 piedi dal dispositivo WatchPAT® ONE.
- b. Spegner tutti gli altri dispositivi di trasmissione nell'ambiente, come altri smartphone, smartwatch e cuffie, poiché potrebbero interferire con il test.
- c. Collegare il telefono al caricatore; dovrà rimanere collegato per tutta la notte. Se durante la notte si ha bisogno di alzarsi, lasciare il telefono collegato; non è necessario portarlo con sé.

A questo punto fare clic sul pulsante "Avvio" per iniziare lo studio del sonno.

AVVIO

11. Al mattino, appena svegli, premere il pulsante "Fine della registrazione" e attendere qualche minuto che il dispositivo completi la trasmissione dei dati. Una volta completata la trasmissione dei dati, si riceverà un messaggio di ringraziamento.

FINE DELLA REGISTRAZIONE

Dopo aver ricevuto il messaggio, premere "Chiudere l'app".

CHIUDERE L'APP

12. Rimuovere il sensore toracico, la sonda e il dispositivo WatchPAT® ONE. Non è necessario conservare il dispositivo o restituirlo; si può semplicemente smaltirlo.