

WatchPAT[®] ONE

Slaapapneu thuisonderzoek voor eenmalig gebruik

Kijk voor een stap voor stap
video-instructie op

watchpatone-howtouse.com

WatchPAT[®] ONE

Slaapapneu thuisonderzoek voor eenmalig gebruik

Etikettering met technische informatie



Let op: Dit apparaat mag op grond van federale wetgeving uitsluitend worden verkocht door of namens een zorgprofessional



Eenmalig gebruik, niet hergebruiken



Temperatuurgrens 0°C - 40°C



Zie de gebruiksaanwijzing

1.5V DC

Bedrijfsspanning van de batterij

IP22

IP-code



Toegepast onderdeel van het type BF



Identificatienummer Federal Communications Commission



Fabrikant van het medische apparaat



Catalogusnummer



Serienummer



Productiedatum



Uiterste gebruiksdatum



Het product is voorzien van CE-logo 2797 voor BSI



Gevolmachtigd vertegenwoordiger in de Europese Gemeenschap



Volgens de AEEA-richtlijn 2012/19/EU moet alle afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (EEA) gescheiden worden ingezameld en niet samen met regulier huishoudelijk afval worden verwijderd. Gooi dit product en alle onderdelen ervan op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier weg.



Voorzichtig, breekbaar



Vorkom contact met water

Heeft u vragen? Neem dan
contact op met
Itamar[®] Medical helpdesk via:
1-888-748-2627

itamar[®]
medical
www.itamar-medical.com



Belangrijke opmerkingen:

- Opslag- en bedieningstemperaturen 0°C - 40°C
- Probeer geen enkel onderdeel van het apparaat aan te sluiten of los te koppelen.
- Probeer geen vreemde voorwerpen in het apparaat te introduceren.
- Probeer een probleem nooit zelf op te lossen.
- De WatchPAT[®] ONE hoort geen ongemak of pijn te veroorzaken. Verwijder het apparaat en bel de helpdesk als u ondraaglijk ongemak ervaart.



Itamar Medical Ltd.
Halamish Street 9, Postbus 3579
Caesarea Ind. Park, 3088900 Israël
T: +972-4-6177000, F: +972-4-6275598



Arazy Group GmbH
The Squire 12, Am Flughafen
60549 Frankfurt am Main
Duitsland

Stap voor stap
gebruikshandleiding

Scan de QR-code hieronder om de
WatchPAT[®] ONE app te downloaden



itamar[®]
medical
www.itamar-medical.com

Voor een stap voor stap video-instructie
ga naar watchpatone-howtouse.com



WatchPAT® ONE

Slaapapneu thuisonderzoek voor eenmalig gebruik

Stap voor stap gebruikshandleiding


Deze handleiding laat u stap voor stap zien hoe u de WatchPAT® ONE Slaapapneu Thuis test correct gebruikt.

Voordat u de WatchPAT® ONE omdoet:

- ✦ Het is aan te raden om de WatchPAT® ONE aan uw niet-dominante hand te bevestigen.
- ✦ De sensor kan om elke vinger gedragen worden, behalve de duim.
- ✦ Verwijder voor gebruik strakke kleding, ringen, horloges en andere sieraden.
- ✦ Verwijder nagellak en kunstnagels van de testvinger en zorg ervoor dat de vingernagel kortgeknipt is.

Opmerking: Gebruik alleen AAA alkalinebatterijen. Plaats de batterij vlak voordat u naar bed gaat.

1. Zorg ervoor dat u internettoegang hebt en uw telefoon, WatchPAT® ONE en pincode klaar hebt liggen voordat u verder gaat met het slaaponderzoek.

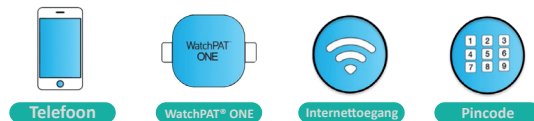

2. Download de app van WatchPAT® ONE op uw mobiele apparaat (beschikbaar via Apple App Store en Google Play Store).



3. Open de WatchPAT® ONE-app en accepteer alle vereiste toestemmingen. Deze toestemmingen zijn nodig om de app te laten functioneren.

Haal de WatchPAT® ONE uit de doos. Druk op de "Voorbeeld"-knop in de app voor een kort overzicht voor het instellen van het apparaat.


VOORBEELD

Druk op de "Klaar"-knop als u klaar bent.

KLAAR


4. Plaats de batterij in de WatchPAT® ONE.

Druk op "Volgende" als dat gedaan is.

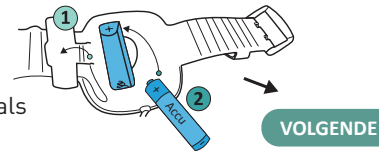

5. Verwijder uw horloge en sieraden van uw testhand.

Druk op "Volgende" als dat gedaan is.

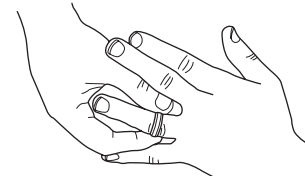


6. Voer de viercijferige pincode in die u van uw huisarts of zorgverlener hebt ontvangen en druk op "Enter".



7. Bevestig de WatchPAT® ONE aan uw niet-dominante hand. Zorg ervoor dat het niet te strak of te los zit.

Druk op "Volgende" als dat gedaan is.

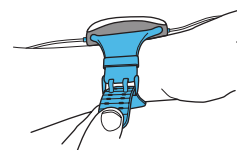

8. Neem de borstsensor (snurk- en lichaamspositiesensor) en voer de kabel via uw mouw naar de halsopening. Verwijder de folie van de sticker en plak de sensor net onder de sternale inkeping.


Druk op "Volgende" als dat gedaan is.

* Als uw WatchPAT® ONE geen borstsensor heeft, kunt u deze stap overslaan.



9. Schuif de probe helemaal om een vinger van uw niet-dominante hand. U kunt elke vinger hiervoor gebruiken, behalve de duim. De probe moet zo geplaatst worden dat de sticker met daarop TOP boven de vingernagel zit. Druk de probe tegen een hard oppervlak en trek voorzichtig de TOP-folie naar u toe om het van de probe te verwijderen.

Druk op "Volgende" als dat gedaan is.

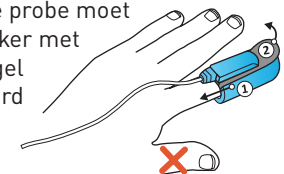

10. U bent nu klaar.

De laatste stappen voordat u aan het slaaponderzoek begint:

- a. Zorg ervoor dat de afstand tussen uw telefoon en de WatchPAT® ONE niet meer dan 5 meter is.
- b. Schakel alle andere zendapparaten in de kamer uit, zoals andere smartphones, smartwatches en koptelefoons, zodat ze het onderzoek niet kunnen storen.
- c. Verbind uw telefoon met de oplader, deze moet de hele nacht aangesloten blijven. Als u er 's nachts uit moet, houd dan de telefoon aangesloten. Het is niet nodig om de telefoon mee te nemen.

Druk op "Start" om uw slaaponderzoek te beginnen.

START

11. Druk op "Einde opname" zodra u 's ochtends wakker wordt en wacht enkele minuten zodat het apparaat de gegevensoverdracht kan voltooien. Na voltooiing van de gegevensoverdracht ontvangt u een bedankbericht.

Als het ontvangen is, drukt u op "Sluit app".

EINDE OPNAME

SLUIT APP

12. Verwijder de borstsensor, probe en WatchPAT® ONE. Het is niet nodig het apparaat te bewaren of terug te sturen. U kunt het gewoon weggooien.