

WatchPAT[®] ONE

Domowy jednorazowy test pod kątem bezdechu sennego

Szczegółowe instrukcje wideo znajdują się na stronie

watchpatone-howtouse.com

WatchPAT[®] ONE

Domowy jednorazowy test pod kątem bezdechu sennego

Etykiety z danymi technicznymi



Uwaga: amerykańskie przepisy federalne ograniczają sprzedaż niniejszego wyrobu do sprzedaży wyłącznie przez licencjonowanego lekarza lub na jego polecenie.



Wyłącznie do użytku jednorazowego — nie używać ponownie



Wartość graniczna temperatury: 0°C – 40°C



Zob. instrukcja użytkownika

1.5V DC

Napięcie robocze baterii

IP22

Klasa ochrony przed wnikaniem



Część stosowana typu BF



Numer identyfikacyjny Federalnej Komisji Łączności



Producent wyrobu medycznego



Numer katalogowy



Numer seryjny



Data produkcji



Termin ważności



Produkt jest oznaczony logo CE 2797 dla instytucji BSI.



Autoryzowany przedstawiciel na terenie Wspólnoty Europejskiej



Zgodnie z dyrektywą WEEE 2012/19/UE wszelkiego rodzaju zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (EEE) należy utylizować osobno, a nie usuwać razem ze zwykłymi odpadami z gospodarstwa domowego. Prosimy o zutylizowanie niniejszego produktu i wszystkich jego części w sposób odpowiedzialny i przyjazny dla środowiska.



Produkt delikatny, zachować ostrożność



Przechowywać w suchym miejscu

W razie wszelkich pytań można skontaktować się z działem pomocy firmy Itamar[®] Medical pod numerem telefonu:
1-888-748-2627

itamar[®]
medical
www.itamar-medical.com



Ważne informacje:

- Temperatury przechowywania i pracy: 0°C – 40°C
- Nie należy próbować podłączać ani odłączać żadnych części urządzenia.
- Nie próbować wprowadzać do urządzenia żadnych obcych przedmiotów.
- Pod żadnym pozorem nie podejmować prób samodzielnego rozwiązywania problemów z urządzeniem.
- Urządzenie WatchPAT[®] ONE nie powinno powodować żadnego dyskomfortu ani bólu. W razie wystąpienia niemożliwego do zniesienia dyskomfortu należy zdjąć urządzenie i skontaktować się z działem pomocy.



Itamar Medical Ltd.

9 Halamish Street, PO box 3579
Caesarea Ind. Park, 3088900 Izrael
Telefon: +972-4-6177000, fax: +972-4-6275598



Arazy Group GmbH

The Squire 12, Am Flughafen
60549 Frankfurt am Main
Niemcy

Szczegółowa instrukcja użycia

Zeskanować poniższy kod QR, aby pobrać aplikację WatchPAT[®] ONE



itamar[®]
medical
www.itamar-medical.com

Instrukcje wideo znajdują się na stronie
watchpatone-howtouse.com



WatchPAT® ONE

Domowy jednorazowy test pod kątem bezdechu sennego

Szczegółowa instrukcja użycia

Niniejszy przewodnik zawiera szczegółowe informacje wyjaśniające sposób prawidłowego korzystania z domowego jednorazowego testu bezdechu sennego WatchPAT® ONE.


Przed zastosowaniem urządzenia WatchPAT® ONE:

- Zaleca się stosowanie urządzenia WatchPAT® ONE na rękę niedominującą.
- Pulsoksymetr można zakładając na każdy palec z wyjątkiem kciuka.
- Przed użyciem zdjąć obciste części garderoby, pierścionki, zegarek i innego rodzaju biżuterię.
- Z palca, na który ma zostać założony czujnik, zmyć lakier do paznokci i — jeżeli ma to zastosowanie — zdjąć sztuczny paznokieć. Paznokieć naturalny krótko obciąć.

Uwaga: należy używać wyłącznie baterii alkalicznych AAA.

Baterię należy włożyć do urządzenia dopiero bezpośrednio przed położeniem się spać.

1. Przed przystąpieniem do badania sprawdzić, czy połączenie z Internetem jest włączone i przygotować telefon, urządzenie WatchPAT® ONE i numer PIN.

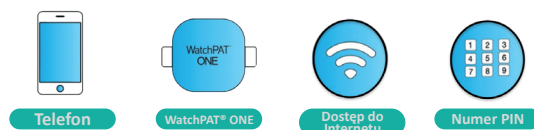

2. Pobrać aplikację WatchPAT® ONE na urządzenie mobilne. (Jest ona dostępna w sklepie Apple App lub Google Play.)



3. Otworzyć aplikację WatchPAT® ONE i udzielić jej wszystkich wymaganych przez nią zezwoleń. Zezwolenia te są niezbędne do działania aplikacji.


Wyjąć urządzenie WatchPAT® ONE z opakowania. Można nacisnąć przycisk „Podgląd” w aplikacji, aby zobaczyć krótką prezentację pokazującą, jak skonfigurować urządzenie.

PODGLĄD

Po zakończeniu nacisnąć przycisk „Gotowy”.

GOTOWY


4. Włożyć baterię do urządzenia WatchPAT® ONE.

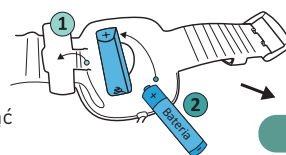

Po zakończeniu nacisnąć przycisk „Dalej”.

DALEJ

5. Z ręki, na którą ma zostać założone urządzenie, zdjąć zegarek i biżuterię.

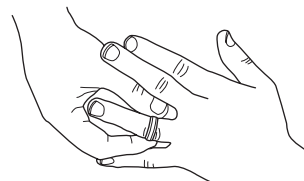

Po zakończeniu nacisnąć przycisk „Dalej”.


DALEJ

6. Wpisać czterocyfrowy kod PIN podany przez gabinet lekarski lub usługodawcę i nacisnąć przycisk „Zaczniij”.



ZACZNIJ

7. Założyć urządzenie WatchPAT® ONE na niedominującą rękę. Upewnić się, że nie jest ono założone zbyt ciasno ani zbyt luźno.

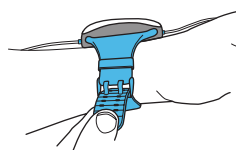

Po zakończeniu nacisnąć przycisk „Dalej”.

DALEJ

8. Kabel czujnika na klatkę piersiową (czujnik chrapania i pozycji ciała) umieścić pod ubraniem — wprowadzając go przez otwór mankietu, a wyprowadzając przez otwór dekoltu. Usunąć ostonę z naklejki i przymocować czujnik tuż pod dotem szyjnym.



Po zakończeniu nacisnąć przycisk „Dalej”.

* Jeśli urządzenie WatchPAT® ONE nie zawiera czujnika na klatkę piersiową, należy pominąć ten krok.

DALEJ

9. Wsunąć palec niedominującej ręki catkowicie do pulsoksymetru. Użyć można dowolnego palca z wyjątkiem kciuka. Pulsoksymetr powinien zostać założony tak, aby naklejka z napisem TOP znajdowała się nad paznokciem. Przytrzymać pulsoksymetr oparty o twardą powierzchnię i powoli pociągnąć naklejkę z napisem TOP do siebie, aby zdjąć ją z pulsoksymetru.



Po zakończeniu nacisnąć przycisk „Dalej”.

DALEJ

10. Urządzenie jest teraz gotowe do użytku. Ostatnie kroki przed rozpoczęciem badania:

- a. Upewnić się, że telefon znajduje się w odległości nie większej niż 5 metrów (15 stóp) od urządzenia WatchPAT® ONE.
- b. Wyłączyć wszystkie inne znajdujące się w pomieszczeniu urządzenia nadawcze, takie jak inne smartfony, zegarki inteligentne i słuchawki, ponieważ mogą one zakłócać przebieg badania.
- c. Podłączyć swój telefon do ładowarki — musi on pozostać podłączony do zasilania przez całą noc. Jeśli konieczne będzie wstanie w nocy, można pozostawić telefon podłączony do prądu — nie trzeba go nosić ze sobą.

Teraz kliknąć przycisk „Start”, aby rozpocząć badanie.

START

11. Rano po przebudzeniu nacisnąć przycisk „Zakończenie rejestrowania” i poczekać kilka minut, aż urządzenie zakończy transmisję danych. Po zakończeniu transmisji danych przestana zostanie wiadomość z podziękowaniem.

ZAKOŃCZENIE REJESTROWANIA

Po otrzymaniu wiadomości nacisnąć przycisk „Zamknij aplikację”.

ZAMKNIJ APLIKACJĘ

12. Zdjąć czujnik z klatki piersiowej, pulsoksymetr i urządzenie WatchPAT® ONE. Nie ma potrzeby zatrzymywania urządzenia lub zwracania go. Można je po prostu wyrzucić.