

WatchPAT[®] ONE

Teste de apneia do sono caseiro descartável

Para instruções em vídeo passo a passo, visite

watchpatone-howtouse.com

WatchPAT[®] ONE

Teste de apneia do sono caseiro descartável



Etiquetagem de informações técnicas

Rx only Atenção: a Lei Federal restringe a venda deste dispositivo a, ou mediante prescrição de um médico licenciado

Descartável, não reutilizar

Limite da temperatura 0 °C - 40 °C

Consulte as instruções de utilização

1.5V DC Tensão de funcionamento da pilha

IP22 Proteção contra infiltrações

Peça aplicada de tipo BF

FCC ID Número de identificação da comissão de comunicações federais
ZAPUBWPONE

Fabricante de dispositivos médicos

REF Número de referência

SN Número de série

Data de fabrico

Utilizar até

CE O produto contém a marca CE 2797 para BSI

EC REP Representante autorizado na Comunidade Europeia

De acordo com a Diretiva REEE 2012/19/UE, todos os equipamentos elétricos e eletrónicos (EEE) devem ser recolhidos em separado e não eliminados juntamente com o lixo doméstico comum. Elimine este dispositivo e todas as suas peças de uma forma responsável e amigável ao ambiente.

Frágil, manusear com cuidado

Mantenha seco

Para quaisquer questões,
pode contactar o
atendimento ao cliente da
Itamar[®] Medical através de:
1-888-748-2627

itamar[®]
medical
www.itamar-medical.com

Guia de instruções passo a passo



Notas importantes:

- Temperaturas de armazenamento e utilização 0 °C - 40 °C
- Não tente ligar ou desligar qualquer parte da unidade.
- Não tente introduzir objetos estranhos na unidade.
- Não tente, em circunstância alguma, corrigir um problema sozinho.
- O WatchPAT[®] ONE não deverá causar desconforto ou dor. Em caso de desconforto insuportável, retire o dispositivo e contacte o atendimento ao cliente.

Itamar Medical Ltd.
9 Halamish Street, PO box 3579
Caesarea Ind. Park 3088900, Israel
T: +972-4-6177000, F: +972-4-6275598

EC REP **Arazy Group GmbH**
The Squire 12, Am Flughafen,
60549 Frankfurt am Main
Alemanha

Leia o código QR abaixo para
transferir a aplicação WatchPAT[®] ONE



itamar[®]
medical
www.itamar-medical.com

Download on the
App Store

ANDROID APP ON
Google play

Para instruções em vídeo passo a passo,
visite watchpatone-howtouse.com



WatchPAT® ONE

Teste de apneia do sono caseiro descartável

Guia de instruções passo a passo


Este guia orienta-o passo a passo e mostra-lhe como utilizar corretamente o Teste de Apneia do Sono Caseiro WatchPAT® ONE.

Antes de colocar o WatchPAT® ONE:

- ✦ É recomendável colocar o dispositivo WatchPAT® ONE na sua mão não dominante.
- ✦ A sonda pode ser usada em qualquer dedo, à exceção do polegar.
- ✦ Remova qualquer vestuário apertado, anéis, relógios e outros artigos de bijuteria.
- ✦ Remova o verniz das unhas e as unhas artificiais do dedo de teste e certifique-se de que a unha está cortada rente.

Nota: utilize apenas baterias alcalinas AAA.
Não insira a bateria até estar pronto para ir para a cama.

1. Antes de começar o estudo do sono, certifique-se de que tem acesso à Internet, ao telemóvel, ao dispositivo WatchPAT® ONE e ao número PIN.

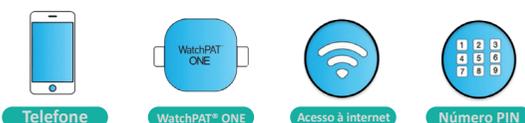

2. Descarregue a aplicação WatchPAT® ONE para o seu dispositivo móvel (disponível na Apple Store da Apple e na Play Store da Google).



3. Abra a aplicação WatchPAT® ONE e autorize todas as permissões solicitadas pela aplicação. Estas permissões são necessárias para o funcionamento da aplicação.


Retire o WatchPAT® ONE da caixa. Pode clicar no botão "Pré-visualizar" na aplicação para ver uma demonstração rápida da configuração do dispositivo.

PRÉ-VISUALIZAR

Prima o botão "Preparado" quando terminar.

PREPARADO


4. Introduza a bateria no dispositivo WatchPAT® ONE.

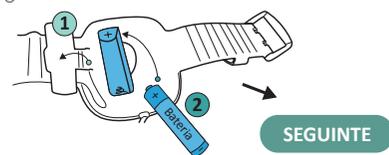

Prima "Seguinte" quando terminar.

SEGUINTE

5. Retire o relógio e as joias da sua mão do teste.

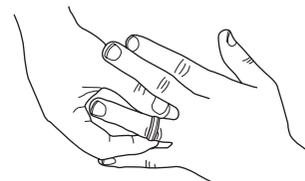


Prima "Seguinte" quando terminar.

SEGUINTE

6. Introduza o código PIN de 4 dígitos que lhe foi fornecido pelo profissional de saúde ou gabinete fornecedor e prima "Entrar".



7. Coloque o dispositivo WatchPAT® ONE na sua mão não dominante. Certifique-se de que não fica nem demasiado apertado nem demasiado solto.

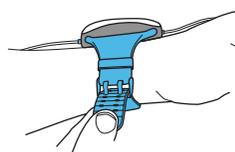

Prima "Seguinte" quando terminar.

SEGUINTE

8. Pegue no sensor do peito (sensor de ressonar e posição corporal) e direcione o cabo inserindo-o pela sua manga e retirando-o pela abertura no pescoço. Remova a proteção do adesivo e cole o sensor logo abaixo do manúbrio.



Prima "Seguinte" quando terminar.

* Se o seu dispositivo WatchPAT® ONE não incluir o sensor de peito, ignore este passo.

SEGUINTE

9. Coloque a sonda até ao fundo do dedo da sua mão não dominante. Pode usar qualquer dedo à exceção do polegar. A sonda deve ficar inserida de forma a que o adesivo assinalado com "TOP" (para cima) fique posicionado por cima da unha. Segure na sonda contra uma superfície rígida e lentamente puxe o adesivo TOP na sua direção, de forma a removê-lo da sonda.



SEGUINTE

Prima "Seguinte" quando terminar.

10. A configuração está concluída. Últimos passos antes de começar o estudo do sono:

- a. Certifique-se de que o seu telemóvel está a uma distância máxima de 5 metros do dispositivo WatchPAT® ONE.
 - b. Desligue todos os outros dispositivos transmissores presentes na divisão tais como relógios inteligentes, outros smartphones e auscultadores, uma vez que podem interferir com o teste.
 - c. Ligue o seu telemóvel ao carregador; deve permanecer ligado durante toda a noite. Se precisar de se levantar durante a noite deixe o telemóvel a carregar, não é preciso levá-lo consigo.
- Agora clique no botão "Iniciar" para dar início ao estudo do sono.

INICIAR

11. De manhã quando acordar, prima o botão "Terminar gravação" e aguarde alguns minutos até que o dispositivo termine a transmissão de dados. Depois de concluir a transmissão de dados, irá receber uma mensagem de agradecimento.

TERMINAR GRAVAÇÃO

Uma vez recebida, prima "Fechar app".

FECHAR APP

12. Retire o sensor do peito, a sonda e o dispositivo WatchPAT® ONE. Não é preciso guardar o dispositivo ou devolvê-lo. Pode simplesmente descartá-lo.