

WatchPAT[®] ONE

Engångstest för sömnapné i hemmet

För en steg-för-steg videoinstruktion,
vänligen besök

watchpatone-howtouse.com

WatchPAT[®] ONE

Engångstest för sömnapné i hemmet

Vid frågor, kontakta
Itamar[®] Medical
kundtjänst på:
1-888-748-2627

Teknisk information för etiketter

Rx only Enligt federal lag i USA får denna anordning endast säljas av eller på order av en läkare

For one-time use only För engångsbruk, återanvänd inte

0°C - 40°C Temperaturgräns 0°C - 40°C

See user manual for instructions Se användaranvisningar

1.5V DC Batteriets driftspänning

IP22 Kapslingsklassning

For use with type BF Tillämpad del av typ BF

FCC ID: ZAPUBWPONE Identifikationsnummer för FCC (Federal kommunikationskommission)

Manufacturer of medical devices Tillverkare av medicinska enheter

REF Katalognummer

SN Serienummer

Installation date Tillverkningsdatum

Use by Använd senast

CE Produkten är märkt med CE-logotypen 2797 för BSI

EC REP Auktoriserad representant inom den Europeiska gemenskapen

WEEE I enlighet med WEEE-direktivet 2012/19/EU, ska allt avfall från elektriska och elektroniska utrustningar (EEE) samlas ihop separat och inte kasseras tillsammans med vanliga hushållssopor. Avfallshandla denna produkt och alla dess ingående delar på ett ansvarsfullt och miljövänligt sätt.

Glass Ömtålig, hanteras varsamt

Keep dry Håll torr

REF: DM2193478 - Edition 2

itamar[®] medical
www.itamar-medical.com



Viktiga observationer:

- Lagring och drifttemperaturer 0°C - 40°C
- Försök inte att ansluta till eller koppla ur någon del av enheten.
- Försök inte att föra in något främmande föremål i enheten.
- Försök inte, under inga villkor, att lösa ett problem på egen hand.
- WatchPAT[®] ONE ska inte förorsaka något obehag eller smärta. Skulle du uppleva outhärdligt obehag, avlägsna enheten och ring till kundtjänst.



Itamar Medical Ltd.
9 Halamish St., P.O. Box 3579
Caesarea Ind. Park, 3088900, Israel
T: +972-4-6177000, F: +972-4-6275598

EC REP Arazy Group GmbH
The Squire 12, AmFlughafen,
60549 Frankfurt am Main,
Tyskland

Steg för steg instruktionsguide

Skanna QR-koden nedan för att hämta
WatchPAT[®] ONE-applikationen



itamar[®] medical
www.itamar-medical.com



För en steg-för-steg videoinstruktion
Besök watchpatone-howtouse.com



WatchPAT® ONE

Engångstest för sömnapné i hemmet

Steg för steg instruktionsguide


Den här guiden visar dig steg för steg hur du korrekt använder WatchPAT® ONE sömnapnétest för hemmet.

Innan du sätter fast WatchPAT® ONE:

- ✦ Sätt på WatchPAT® ONE-enheten på din icke-dominanta handled.
- ✦ Sonden kan bäras på vilket finger som helst, med undantag för tummen.
- ✦ Före användning, ta av åtsittande kläder, ringar, klockor och andra smycken.
- ✦ Avlägsna nagellack och konstgjorda naglar från testfingret och se till att naglarna är kortklippta.

Obs: använd endast alkaliskt AAA-batteri.
Sätt inte i batteriet förrän du är redo att gå och lägga dig.

1. Innan du fortsätter med din sömnstudie, se till att du har tillgång till Internet, din telefon, WatchPAT® ONE-enhet och PIN-kod.

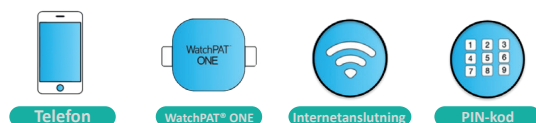

2. Ladda ner WatchPAT® ONE-appen till din mobilenhet (tillgänglig på Apple App Store och Google Play Store).



3. Öppna WatchPAT® ONE-appen och godkänn alla behörigheter som krävs av appen. Dessa behörigheter är nödvändiga för att appen ska fungera.


Plocka ur WatchPAT® ONE ur förpackningen. Du kan klicka på knappen "Förhandsgranska" i appen för att få en snabbtur som visar hur du ställer in enheten.

FÖRHANDSGRANSKA

Tryck på knappen "Redo" när du är klar.


REDO

4. Sätt i batteriet i WatchPAT® ONE-enheten.

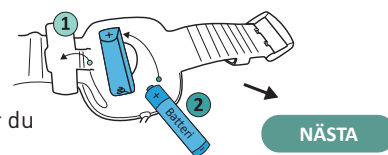

Tryck på "Nästa" när du är klar.

5. Ta bort din klocka och smycken från din testhand.

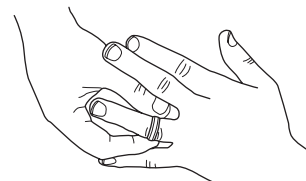


Tryck på "Nästa" när du är klar.

NÄSTA

6. Ange den fyrsiffriga PIN-koden som du fick från läkarmottagningen eller leverantör och tryck på "Bekräfta".



7. Placera WatchPAT® ONE-enheten på din icke-dominanta handled. Se till att den inte sitter för hårt och inte för löst.

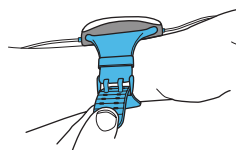

Tryck på "Nästa" när du är klar.

NÄSTA

8. Ta bröstsensorn (snarkning och kroppssensor) och för in kabeln genom ärmen och ut genom halsöppningen. Avlägsna fliken från etiketten och fäst sensorn precis nedanför halsgropen.




Tryck på "Nästa" när du är klar.

*Inkluderar din WatchPAT® ONE-enhet inte bröstsensorn, hoppa över detta steg.

NÄSTA

9. Placera sonden hela vägen på ett finger på din icke-dominanta handled. Du kan använda vilket finger som helst, men undantag för tummen. Sonden ska sättas in så att klistermärket märkt TOP placeras ovanför nageln. Håll sonden mot en hård yta och dra fliken TOP mot dig för att avlägsna den från sonden.

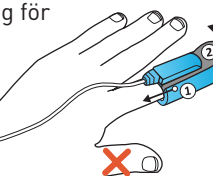

Tryck på "Nästa" när du är klar.

NÄSTA

10. Nu är du redo.
Sista steg innan du börjar din sömnstudie:

- Se till att din telefonen är placerad högst 5 m från WatchPAT® ONE-enheten.
- Stäng av all annan sändande utrustning i rummet, såsom andra smarttelefoner, smartklockor och hörlurar, eftersom de kan störa testet.
- Anslut din telefon till laddaren, den måste vara inkopplad under hela natten. Om du måste gå upp under natten ska du lämna telefonen där den är, ansluten till elnätet. Du behöver inte ta med dig den.

Klicka nu på "Starta"-knappen för att börja din sömnstudie.

STARTA

11. På morgonen när du vaknar, tryck på knappen "Avsluta inspelningen" och vänta några minuter på att enheten ska slutföra dataöverföringen. När du har slutfört dataöverföringen får du ett tackmeddelande.

AVSLUTA
INSPELNINGEN

När du har fått det, tryck på "Stäng appen".

STÄNG APPEN

12. Ta bort bröstsensorn, sonden och WatchPAT® ONE-enheten. Det finns inget behov av att behålla enheten eller skicka tillbaka den. Du kan kassera den.