

WatchPAT[®] ONE

Engangs- og hjemmetest for søvnapnø

Se den trinvis videovejledning på

watchpatone-howtouse.com

WatchPAT[®] ONE

Engangs- og hjemmetest for søvnapnø



Teknisk informationsmærkning

Rx only Advarsel: Føderal amerikansk lovgivning begrænser denne enhed til salg af eller efter henvisning fra en læge.

Engangsbrug, må ikke genbruges

Temperaturgrænse 0 °-40 °C

Se brugsanvisningen

1.5V DC Batteriets driftsspænding

IP22 Indtrængningsbeskyttelse

Type BF-anvendt del

FCC ID
2APUBWPONE Føderalt id-nummer

Producent

REF Katalognummer

SN Serienummer

Fremstillingsdato

Sidste anvendelsesdato

CE Produktet er mærket med CE-logoet 2797 til BSI

EC REP Autoriseret repræsentant i Det Europæiske Fællesskab

I henhold til WEEE-direktivet 2012/19/EU skal alt elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) opsamles separat og ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Bortskaf dette produkt og alle dets dele på en ansvarlig og miljøvenlig måde.

Skrabelig genstand, håndteres forsigtigt

Opbevares tørt

Hvis du har spørgsmål,
kan du kontakte
Itamar[®] Medical-
helpdesk på:
1-888-748-2627

itamar[®]
medical
www.itamar-medical.com

Trinvis vejledning

Scan QR-koden nedenfor for at
downloade WatchPAT[®] ONE-applikationen



Download on the
App Store



Android app on
Google play



Vigtige bemærkninger:

- Opbevaring og driftstemperaturer 0 °C - 40 °C
- Forsøg ikke at tilslutte eller frakoble nogen del af enheden.
- Forsøg ikke at introducere nogen fremmed genstand i enheden.
- Forsøg ikke under nogen omstændigheder at løse et problem selv.
- WatchPAT[®] ONE bør ikke give ubehag eller smerte. Hvis du mærker en uudholdelig smerte, skal enheden fjernes og helpdesk kontaktes.



Itamar Medical Ltd.
9 Halamish Street, PO box 3579
Caesarea Ind. Park, 3088900 Israel
T: +972-4-6177000, F: +972-4-6275598

EC REP

Arazy Group GmbH
The Squire 12, Am Flughafen
60549 Frankfurt am Main
Tyskland

Se den trinvis videovejledning på
watchpatone-howtouse.com



WatchPAT® ONE

Engangstest for søvnapnø

Trinvis vejledning


Denne vejledning forklarer dig trin for trin, hvordan du bruger WatchPAT® ONE-hjemmetest til søvnapnø korrekt.

Før du påfører WatchPAT® ONE:

- ✚ Det anbefales at påføre WatchPAT® ONE-enheden på den hånd, du ikke normalt bruger.
- ✚ Proben kan bæres på enhver finger undtagen tommelfingeren.
- ✚ Før brug fjernes tætsiddende tøj, ringe, ure og smykker.
- ✚ Fjern neglelak og kunstige negle fra testfingeren, og sørg for, at fingerneglen er klippet kort.

Bemærk: Brug kun alkaline AAA-batterier.
Indsæt ikke batteriet, før du er klar til at gå i seng.

1. Før du starter dit søvnstudie, skal du sørge for at have internetadgang, din telefon, WatchPAT® ONE og PIN-koden.

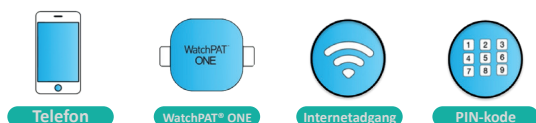

2. Download WatchPAT® ONE-applikationen på din mobiltelefon (fås i Apple App Store og Google Play Store).



3. Åbn WatchPAT® ONE-applikationen og giv den nødvendige tilladelse til applikationen. Denne tilladelse er nødvendig for, at applikationen kan anvendes.


Tag WatchPAT® ONE ud af kassen. Klik på knappen "Forhåndsvisning" for en hurtig visning af, hvordan enheden virker.

FORHÅNDSVISNING

Tryk derefter på knappen "Klar".

KLAR


4. Indsæt batteriet i WatchPAT® ONE-enheden.

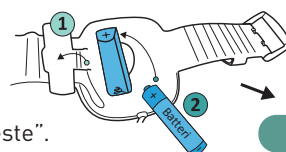

Tryk derefter på "Næste".

NÆSTE


5. Fjern ur og smykker fra testhånden.

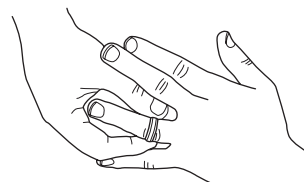

Tryk derefter på "Næste".


NÆSTE

6. Indtast den 4-cifrede PIN-kode fra lægen eller udbyderen og tryk "Enter".

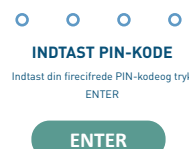

ENTER

7. Sæt WatchPAT® ONE-enheden på den hånd, du ikke normalt bruger. Sørg for den ikke sidder for stramt eller løst.

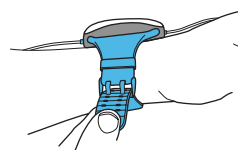

Tryk derefter på "Næste".

NÆSTE

8. Tag brystsensoren (snorke- og kropssensor) og før kablet gennem dit ærme og ud gennem halsåbningen. Fjern tapen fra mærkaten, og fastgør sensoren lige under dit sternale hak.




Tryk derefter på "Næste".

* Hvis WatchPAT® ONE-enheden ikke inkluderer en brystsensor, skal du gå til næste trin.

NÆSTE

9. Placer proben på fingeren på den hånd, du ikke normalt bruger. Du kan bruge alle fingre undtagen tommelfingeren. Proben skal indsættes, så klistermærkets top er placeret over fingerneglen. Hold proben mod en hård overflade og træk langsomt den øverste tap mod dig for at fjerne proben.

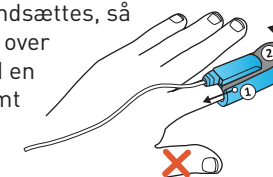

Tryk derefter på "Næste".

NÆSTE

10. Du er nu færdig.
Et par sidste trin, før du begynder søvnstudiet:

- a. Sørg for, at mobiltelefonen ikke er længere end 5 meter fra WatchPAT® ONE-enheden.
- b. Slå alle transmitterende enheder i rummet fra, såsom smartphones, smartwatches og hovedtelefoner, der kan påvirke testen.
- c. Tilslut din telefon til opladeren og lad blive der hele natten. Hvis du er nødt til at stå op i løbet af natten, skal telefonen blive, hvor den er.

Klik nu på knappen "Start" for at begynde søvnstudiet.

START

11. Når du vågner op næste morgen, trykkes på knappen "Afslut optagelse" og vent et par minutter, før enheden afslutter dataoverførslen. Efter dataoverførslen vil du modtage en bekræftelse.

AFSLUT OPTAGELSE

Efter modtagelse klikkes på "Luk app".

LUK APP

12. Fjern brystsensoren, proben og WatchPAT® ONE-enheden. Du behøver ikke beholde eller aflevere enheden. Du kan blot smide den ud.