

WatchPAT[®] ONE

Uniapneatesti kotikäyttöön, kertakäyttöinen

Vaiheittainen video-ohje on
katsottavissa osoitteessa

watchpatone-howtouse.com

WatchPAT[®] ONE

Uniapneatesti kotikäyttöön, kertakäyttöinen

Kysymyksissä voit ottaa yhteyttä
Itamar[®] Medical -yhtiön
käyttäjätukeen numerossa:
1-888-748-2627

Tekniset merkinnät

	Huomio: Yhdysvaltain liittovaltion laki rajoittaa tämän laitteen myynnin lääkäreille tai heidän määräyksestään
	Kertakäyttöinen; ei saa käyttää uudelleen
	Lämpötilarajoitus 0-40 °C
	Lue käyttöohje
1.5V DC	Pariston käyttöjännite
IP22	Kotelointiluokka
	Tyypin BF sovellettu osa
FCC ID ZAPUBWPONE	Yhdysvaltain liittovaltion viestintäkomission tunnistenumero
	Lääkinnällisen laitteen valmistaja
REF	Tuotenumero
SN	Sarjanumero
	Valmistuspäivä
	Viimeinen käyttöpäivä
CE	Tuotteessa on CE-merkintä 2797 (BSI)
EC REP	Valtuutettu edustaja Euroopan yhteisössä
	Kaikki sähkö- ja elektroniikkalaiteromu tulee sähkö- ja elektroniikkalaiteromudirektiivin 2012/19/EU mukaisesti kerätä erikseen, eikä sitä saa hävittää tavallisen talousjätteen mukana. Tämä tuote ja kaikki sen osat tulee hävittää vastuullisella ja ympäristöystävällisellä tavalla.
	Särkyvää, käsiteltävä huolellisesti
	Pidä kuivana

REF DM2193480 - Edition 2

itamar[®]
medical
www.itamar-medical.com



Tärkeitä huomioita:

- Säilytys- ja käyttölämpötila 0-40 °C
- Älä yritä liittää tai kytkeä irti mitään yksikön osaa.
- Älä työnä yksikköön mitään vieraita esineitä.
- Älä yritä korjata mitään vikoja itse missään olosuhteissa.
- WatchPAT[®] ONE -laitteen ei tule aiheuttaa kipua tai epämukavuutta. Jos liiallista epämukavuutta esiintyy, poista laite käytöstä ja soita käyttäjätukeen.



Itamar Medical Ltd.

9 Halamish Street, PO box 3579
Caesarea Ind. Park, 3088900 Israel
Puh.: +972-4-6177000, Faksi: +972-4-6275598

EC REP

Arazy Group GmbH

The Squire 12, Am Flughafen
60549 Frankfurt am Main
Saksa

Vaiheittainen ohje

Lataa WatchPAT[®] ONE -sovellus
skannaamalla alla oleva QR-koodi



itamar[®]
medical
www.itamar-medical.com



Katso vaiheittainen video-ohje osoitteessa
watchpatone-howtouse.com



WatchPAT® ONE

Uniapneatesti kotikäyttöön, kertakäyttöinen

Vaiheittainen ohje


Tässä ohjeessa kerrotaan vaiheittain, miten kotikäyttöistä WatchPAT® ONE -uniapneatestiä käytetään oikein.

Ennen WatchPAT® ONE -laitteen käyttöä:

- ✦ WatchPAT® ONE -laite on suositeltavaa kiinnittää ei-hallitsevaan käteen.
- ✦ Anturin voi kiinnittää mihin tahansa sormeen peukaloa lukuun ottamatta.
- ✦ Riisu ennen käyttöä tiukat vaatteet, kellot, sormukset ja muut korut.
- ✦ Poista testisormesta kynsilakka ja tekokynnet ja varmista, että kynsi on leikattu lyhyeksi.

Huomautus: Käytä ainoastaan AAA-alkaliparistoa. Aseta paristo paikalleen vasta, kun olet valmis yöunille.

1. Varmista ennen unitutkimuksen aloittamista, että sinulla on Internet-yhteys, puhelin, WatchPAT® ONE -laite ja PIN-koodi.

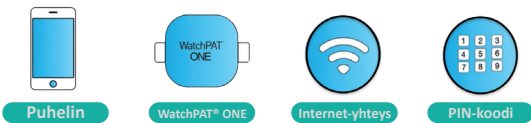

2. Lataa WatchPAT® ONE -sovellus mobiililaitteeseesi (saatavana Apple App Storesta ja Google Play Storesta).



3. Avaa WatchPAT® ONE -sovellus ja myönnä sille kaikki sen tarvitsemat käyttöoikeudet. Sovellus ei toimi oikein ilman näitä käyttöoikeuksia.


Poista WatchPAT® ONE pakkauksestaan. Kun napsautat sovelluksen "Esikatselu" -painiketta, sinulle näytetään laitteen valmistelua koskeva pikaohje.

ESIKATSELU

Kun olet valmis, paina "Valmis" -painiketta.

VALMIS


4. Aseta paristo WatchPAT® ONE -laitteeseen.

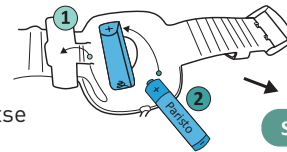

Kun olet valmis, valitse "Seuraava".

SEURAAVA

5. Riisu testikädestä kello ja kaikki korut.

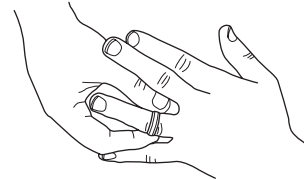

Kun olet valmis, valitse "Seuraava".


SEURAAVA

6. Syötä lääkäriltäsi tai muulta taholta saamasi nelinumeroinen PIN-koodi ja valitse "Enter".

SYÖTÄ PIN-KOODI
Syötä nelinumeroinen PIN-koodisi
(henkilökohtainen tunnistenumero) ja
napauta ENTER

ENTER

7. Aseta WatchPAT® ONE -laite ei-hallitsevaan käteesi. Varmista, ettei se ole liian tiukalla tai liian löysällä.

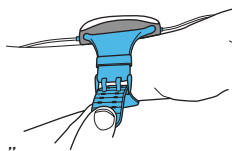

Kun olet valmis, valitse "Seuraava".

SEURAAVA

8. Vie rinta-anturi (kuorsausta ja vartalon asentoa mittaava anturi) hihasta sisään ja kuljeta se kaula-aukon kohdalle saakka. Irrota tarran taustapaperi ja kiinnitä anturi aivan rintalastan kaulaloven alapuolelle.




Kun olet valmis, valitse "Seuraava".

* Jos WatchPAT® ONE -laitteessasi ei ole rinta-anturia, ohita tämä vaihe.

SEURAAVA

9. Työnnä anturi kokonaan ei-hallitsevan käden sormeesi. Voit käyttää mitä tahansa sormea peukaloa lukuun ottamatta. Anturi tulee asettaa paikalleen siten, että TOP-tarramerkinä on kynnen päällä. Pitele anturia kovaa pintaa vasten ja vedä TOP-kieleke irti vetämällä sitä varoen itseäsi kohden.

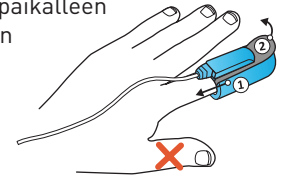

Kun olet valmis, valitse "Seuraava".

SEURAAVA

10. Kaikki on nyt valmista. Huomioi vielä seuraavat seikat ennen unitutkimuksen aloittamista:

- a. Varmista, että puhelimesi on enintään 5 metrin päässä WatchPAT® ONE -laitteesta.
- b. Kytke pois päältä kaikki muut huoneessa olevat lähetyslaitteet, kuten muut älypuhelimet, älykellot ja kuulokkeet, sillä ne voivat häiritä testiä.
- c. Kytke puhelimesi laturiin koko yön ajaksi. Jos sinun on nouseva ylös keskellä yötä, jätä puhelin laturiin – sitä ei tarvitse kantaa mukana.

Aloita unitutkimus napsauttamalla "Aloita" -painiketta.

ALOITA

11. Kun heräät aamulla, paina "Lopeta tallennus" -painiketta ja odota muutama minuutti, kunnes laite on lähettänyt kaikki tiedot. Sinulle näytetään kiitosviesti, kun tiedot on lähetetty.

LOPETA TALLENNUS

Paina tällöin "Sulje sovellus" -painiketta.

SULJE SOVELLUS

12. Riisu rinta-anturi, sormianturi ja WatchPAT® ONE -laite. Laitetta ei tarvitse säilyttää tai palauttaa. Voit hävittää sen.