

WatchPAT[®] ONE

Hjemmetest for søvnapné for engangsbruk

For en trinnvis instruksjonsvideo,
vennligst besøk

watchpatone-howtouse.com

WatchPAT[®] ONE

Hjemmetest for søvnapné for engangsbruk



Teknisk informasjon om merking

Rx only Advarsel: I henhold til føderale lover i USA, er salg av denne enheten begrenset til lisensiert helsepersonell

Engangsbruk, skal ikke brukes flere ganger

Temperaturgrense 0 °C - 40 °C

Se bruksanvisningen

1.5V DC Batteriets driftsspenning

IP22 Beskyttelse mot inntrengning

Anvendt del av type BF

FCC ID
2APUBWPONE ID-nummer for Federal Communications Commission

Produsent av medisinsk utstyr

REF Katalognummer

SN Serienummer

Produksjonsdato

Brukes innen

CE Produktet er merket med CE-logo 2797 for BSI

EC REP Autorisert representant i EU

I henhold til WEEE-direktivet 2012/19/EU, skal alt avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (EEE) samles inn separat og ikke kasseres sammen med vanlig husholdningsavfall. Kasser dette produktet og alle tilhørende deler på en forsvarlig og miljøvennlig måte.

Skjør, håndteres varsomt

Hold tørr

Hvis du har spørsmål
kan du ta kontakt med
Itamar[®] Medicals
kundeservice på:
1-888-748-2627

itamar[®]
medical
www.itamar-medical.com



Viktige merknader:

- Lagrings- og brukstemperaturer 0°C - 40 °C
- Ikke koble til eller koble fra noen del av enheten.
- Ikke før noen fremmedlegemer inn i enheten.
- Du skal ikke under noen omstendigheter forsøke å løse et problem på egen hånd.
- WatchPAT[®] ONE bør ikke gi noe ubehag eller smerter. Hvis du opplever utålelig ubehag, må du fjerne enheten og ringe kundeservice.



Itamar Medical Ltd.

9 Halamish Street, PO box 3579
Caesarea Ind. Park 3088900, Israel
T: +972-4-6177000, F: +972-4-6275598

EC REP Arazy Group GmbH

The Squire 12, Am Flughafen
60549 Frankfurt am Main
Tyskland

Trinnvis instruksjonsveiledning

Skann QR-koden nedenfor for å laste
ned WatchPAT[®] ONE-applikasjonen



itamar[®]
medical
www.itamar-medical.com



For trinnvis videoinstruksjoner
Besøk watchpatone-howtouse.com



WatchPAT® ONE

Hjemmetest for søvnapné for engangsbruk

Trinnvis instruksjonsveiledning


Denne veiledningen gir deg trinnvise instruksjoner og viser deg hvordan du bruker WatchPAT® ONE hjemmetesten for søvnapné på riktig måte.

Før du bruker WatchPAT® ONE:

- ✦ Det anbefales at du bruker WatchPAT® ONE-enheten på den ikke-dominante hånden din.
- ✦ Sonden kan brukes på alle fingre, unntatt tommelen.
- ✦ Ta av stramme klær, ringe, klokke og andre smykker før bruk.
- ✦ Fjern neglelakk og kunstige negler fra testfingeren, og påse at neglen er kort.

Merk: Bruk bare alkaliske AAA-batterier.
Ikke sett i batteriet før du er klar til å legge deg.

1. Før du setter i gang med søvnstudien, må du kontrollere at du har tilgang til internett, telefonen din, WatchPAT® ONE-enheten og en PIN.

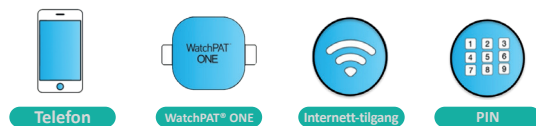

2. Last ned WatchPAT® ONE-applikasjonen til mobilenheten (tilgjengelig fra Apple Store eller Google Play Store).



3. Åpne WatchPAT® ONE-applikasjonen og tillat alle tillatelsene som kreves av applikasjonen. Disse tillatelsene er nødvendige for at applikasjonen skal fungere.


Ta WatchPAT® ONE ut av esken. Du kan klikke på knappen "Preview" (Forhåndsvisning) på applikasjonen hvis du vil ha en rask gjennomgang av hvordan du konfigurerer enheten.

FORHÅNDSVISNING

Trykk på knappen "Ready" (Klar) når du er ferdig.

KLAR


4. Sett batteriet inn i WatchPAT® ONE-enheten.

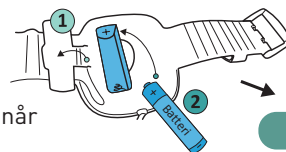

Trykk "Next" (Neste) når du er ferdig.

NESTE


5. Ta av klokken og smykker fra testhånden.

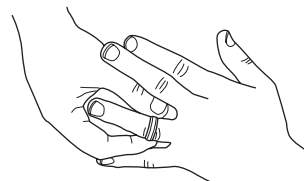


Trykk "Next" (Neste) når du er ferdig.

NESTE

6. Skriv inn den firesifrede PIN-koden du har mottatt fra legen eller leverandøren og trykk "Enter".

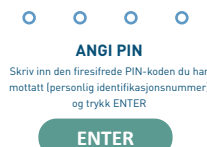

7. Sett WatchPAT® ONE-enheten på den ikke-dominante hånden din. Kontroller at den ikke er for stram og ikke for løs.

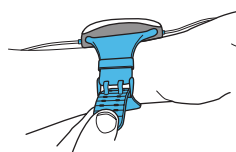

Trykk "Next" (Neste) når du er ferdig.

NESTE

8. Ta brystsensoren (sensoren for snorking og kroppsposisjon) og la kabelen gå inn gjennom ermet og ut gjennom halsåpningen. Fjern lappen fra klistremerket og fest sensoren rett nedenfor halsgropen.




Trykk "Next" (Neste) når du er ferdig.

*Hvis WatchPAT® ONE-enheten din ikke har brystsensoren kan du hoppe over dette trinnet.

NESTE

9. Plasser sonden på tuppen av en finger på den ikke-dominante hånden din. Du kan bruke alle fingre unntatt tommelen. Sonden skal settes slik at klistremerket som er merket med TOP er plassert over fingerne. Hold proben mot en hard overflate og trekk TOP-lappen sakte mot deg for å fjerne den fra sonden.

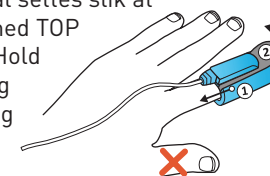

Trykk "Next" (Neste) når du er ferdig.

NESTE

10. Du er helt klar.
Noen få siste trinn før du begynner søvnstudien:

- Kontroller at telefonen din ikke befinner seg mer enn 15 fot/fem meter unna WatchPAT® ONE-enheten.
- Slå av alle andre sendere i rommet, f.eks. andre smarttelefoner, smartklokker eller hodetelefoner, da disse kan forstyrre testen.
- Koble telefonen til laderen. Den må være tilkoblet gjennom hele natten. Hvis du må stå opp i løpet av natten kan du la telefonen være tilkoblet. Du trenger ikke ta den med deg.

Nå kan du klikke på "Start"-knappen for å starte søvnstudien.

START

11. Når du våkner om morgenen trykker du "End Recording" (Avslutt innspilling)-knappen. Deretter venter du noen få minutter slik at enheten kan fullføre dataoverføringen. Etter at dataoverføringen er fullført, vil du få en melding som takker deg.

AVSLUTT INNSPILLING

Når denne meldingen er mottatt, trykker du på "Close Application" (Lukk applikasjonen).

LUKK APPLIKASJONEN

12. Fjern brystsensoren, sonden og WatchPAT® ONE-enheten. Du trenger ikke beholde eller returnere enheten. Etter bruk kan du kaste enheten i søppelet.