

WatchPAT[®] ONE

Egyszer használatos otthoni alvási apnoe teszt

A részletes videós útmutatót lásd

watchpatone-howtouse.com

WatchPAT[®] ONE

Egyszer használatos otthoni alvási apnoe teszt

Műszaki információ címkézés



Vigázat: Az Amerikai Egyesült Államok szövetségi törvényei szerint ezen eszköz eladása korlátozott: csak orvos által vagy orvosi rendelvényre történhet



Egyszer használatos, ne használja újra



Hőmérséklet határ: 0 °C - 40 °C



Lásd a használati útmutatót

1.5V DC

Az akkumulátor üzemi feszültsége

IP22

Behatolásvédelem



BF (Body Floating) típusú alkalmazott alkatrészek



Szövetségi Kommunikációs Bizottság azonosító szám



Az orvosi eszköz gyártója



Katalógusszám



Sorozatszám



Gyártási dátum



Felhasználhatóság dátuma



A terméket a BSI (British Standards Institution) esetében a CE 2797 logó jelöli



Az Európai Közösségben képviseletre jogosult



A 2012/19/EU elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló WEEE irányelv szerint az elektromos és elektronikus berendezések (EEE) hulladékaikat külön kell gyűjteni, és nem szabad a háztartási hulladékkal együtt megsemmisíteni. Kérjük, ártalmatlanítsa ezt a terméket és annak minden részét felelősségteljes és környezetbarát módon.



Törékeny, óvatosan kezelendő



Tartsa szárazon

Ha bármilyen kérdése van,
forduljon az
Itamar[®] Medical
ügyfélszolgálatához:
1-888-748-2627

itamar[®]
medical
www.itamar-medical.com



Fontos megjegyzések:

- Tárolási és működési hőmérséklet: 0°C - 40°C
- Ne kísérelje meg csatlakoztatni vagy leválasztani az eszközt bármelyik részét.
- Ne kíséreljen meg idegen tárgyakat behelyezni az eszközbe.
- Semmilyen körülmények között ne kíséreljen meg egyedül megoldani egy problémát.
- A WatchPAT[®] ONE nem okozhat kellemetlenséget vagy fájdalmat. Ha elviselhetetlen kellemetlenséget tapasztal, távolítsa el az eszközt, és hívja az ügyfélszolgálatot.



Itamar Medical Ltd.

9 Halamish Street, PO box 3579
Caesarea Ind. Park, 3088900 Izrael
T: +972-4-6177000, F: +972-4-6275598



Arazy Group GmbH

The Squire 12, Am Flughafen
60549 Frankfurt am Main
Németország

Részletes útmutató

Szkennelje be az alábbi QR-kódot a
WatchPAT[®] ONE alkalmazás letöltéséhez



itamar[®]
medical
www.itamar-medical.com

A részletes videós útmutatások megtekintéséhez
látogasson el a watchpatone-howtouse.com oldalra:



WatchPAT® ONE Egyszer használatos otthoni alvási apnoe teszt Részletes útmutató

Ez az útmutató lépésről lépésre bemutatja, hogyan kell helyesen használni a WatchPAT® ONE otthoni alvási apnoe tesztet.

A WatchPAT® ONE használata előtt:


- ✦ Javasoljuk, hogy a WatchPAT® ONE eszközt a nem domináns kezére helyezze.
- ✦ Az érzékelő bármelyik ujjon viselhető, kivéve a hüvelykujjat.
- ✦ Használat előtt vegye le a szoros ruhát, gyűrűket, órát és egyéb ékszereket.
- ✦ Távolítsa el a körömlakkot és a műkörmöket a vizsgálati ujjától, és ellenőrizze, hogy a köröm rövidre van-e vágva.

Megjegyzés: Csak alkáli AAA elemet használjon.
Csak akkor helyezze be az elemet, ha készen áll lefeküdni.

1. Az alvásvizsgálat megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy rendelkezik internet-hozzáféréssel, van-e a telefonja, WatchPAT® ONE eszköze és PIN-kódja.



Telefon

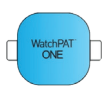

WatchPAT® ONE



Internet-hozzáférés



PIN-kód

2. Töltse le a WatchPAT® ONE alkalmazást mobil eszközére (elérhető az Apple App Store-ban vagy a Google Play Store-ban).



3. Nyissa meg a WatchPAT® ONE alkalmazást, és engedélyezze az alkalmazás által megkövetelt összes engedélyt. Ezek az engedélyek szükségesek az alkalmazás működéséhez.


Vegye ki a WatchPAT® ONE-t a dobozból. Az alkalmazás „Preview” (Előnézet) gombjára kattintva gyors bemutatót kaphat az eszköz beállításáról.

ELŐNÉZET

Ha elkészült, nyomja meg a „Ready” (Kész) gombot.

KÉSZ


4. Helyezze be az elemet a WatchPAT® ONE eszközbe.

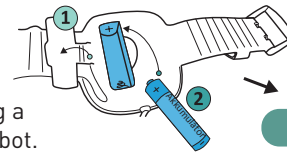

Ha kész, nyomja meg a „Next” (Tovább) gombot.

TOVÁBB

5. Vegye le az óráját és az ékszereket a vizsgálati kézről.

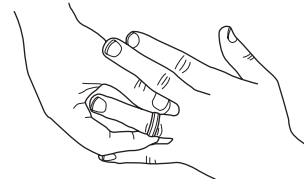

Ha kész, nyomja meg a „Next” (Tovább) gombot.


TOVÁBB

6. Írja be az orvosi rendelő vagy a szolgáltató által megadott 4 számjegű PIN-kódot, és nyomja meg az „Enter” (Bevitel) gombot.



BEVITEL

7. Helyezze a WatchPAT® ONE eszközt a nem domináns kezére. Győződjön meg róla, hogy nem túl szoros és nem túl laza.

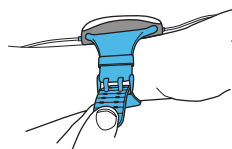

Ha kész, nyomja meg a „Next” (Tovább) gombot.

TOVÁBB

8. Fogja a mellkasérzékelőt (horkolás- és testhelyzet-érzékelő), és vezesse a kábelt a ruha ujj- és a nyaknyílásán keresztül. Távolítsa el a lapot a matricáról, és rögzítse az érzékelőt közvetlenül a szegycsonti mélyedés alatt.




Ha kész, nyomja meg a „Next” (Tovább) gombot.

* Ha a WatchPAT® ONE eszköz nem tartalmazza a mellkasi érzékelőt, hagyja ki ezt a lépést.

TOVÁBB

9. Helyezze az érzékelőt egészen a nem domináns keze egyik ujjára. A hüvelykujj kivételével bármelyik ujját használhatja. Az érzékelőt úgy kell felhelyezni, hogy a TOP feliratú matrica a köröm felett legyen. Tartsa az érzékelőt egy kemény felülethez, és lassan húzza maga felé a TOP fület, hogy eltávolítsa az érzékelőről.

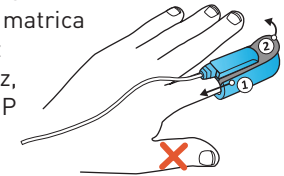

Ha kész, nyomja meg a „Next” (Tovább) gombot.

TOVÁBB

10. Minden készen áll.
Az alvásvizsgálat megkezdése előtti utolsó néhány lépés:

- A telefon ne legyen 15 lábna/5 méternél tovább a WatchPAT® ONE eszköztől.
- Kapcsoljon ki minden más, a szobában lévő, jelet kibocsátó eszközt, például más okostelefonokat, okosórákat és fejhallgatókat, mivel ezek zavarhatják a vizsgálatot.
- Csatlakoztassa a telefont a töltőhöz, annak egész éjszaka csatlakoztatva kell maradnia. Ha éjszaka fel kell kelnie, hagyja bedugva a telefont, nem kell magával vinnie.

Most kattintson a „Start” (Indítás) gombra az alvásvizsgálat megkezdéséhez.

INDÍTÁS

11. Reggel, amikor felébred, nyomja meg az „End Recording” (Rögzítés befejezése) gombot, és várjon néhány percet, amíg az eszköz befejezi az adatátvitelt. Az adatátvitel befejezése után egy köszönő üzenetet fog kapni.

RÖGZÍTÉS
BEFEJEZÉSE

Miután megkapta, nyomja meg a „Close Application” (Alkalmazás bezárása) gombot.

ALKALMAZÁS
BEZÁRÁSA

12. Vegye le a mellkasi érzékelőt, az ujjérzékelőt és a WatchPAT® ONE eszközt. Az eszközt nem kell megtartani vagy visszaküldeni. Egyszerűen kidobhatja.