

WatchPAT[®] ONE

Test pentru apnee în somn, de unică folosință, pentru utilizare la domiciliu

Pentru instrucțiuni video pas cu pas,
accesați

watchpatone-howtouse.com

WatchPAT[®] ONE

Test pentru apnee în somn, de unică folosință, pentru utilizare la domiciliu

Etichetă cu informații tehnice

Rx only

Atenție: Conform legii federale, acest dispozitiv poate fi comercializat numai de către sau la prescripția unui cadru medical autorizat.



De unică folosință, a nu se reutiliza



Limita de temperatură 0°C - 40°C



Consultați instrucțiunile de utilizare

1.5V DC

Tensiune de funcționare a bateriei

IP22

Protecție împotriva pătrunderii particulelor străine



Componentă în contact cu pacientul, de tip BF

FCC ID
2APUBWPONE

Număr de identificare al comisiei federale de comunicații



Fabricantul dispozitivului medical

REF

Număr de catalog

SN

Număr de serie



Data fabricației



Data de expirare



Produsul este marcat cu logo-ul CE 2797 pentru BSI

EC REP

Reprezentant autorizat în Comunitatea Europeană



Conform Directivei DEEE 2012/19/UE, toate deșeurile de echipamente electrice și electronice (EEE) trebuie colectate separat și nu trebuie eliminate împreună cu deșeurile casnice obișnuite. Eliminați acest produs și toate părțile acestuia în mod responsabil și ecologic.



Fragil, manipulați cu atenție



A se feri de umiditate

Dacă aveți întrebări, puteți
contacta Biroul de asistență
Itamar[®] Medical la numărul
de telefon:
1-888-748-2627

itamar[®]
medical
www.itamar-medical.com



Note importante:

- Temperaturi de depozitare și funcționare 0°C - 40°C
- Nu încercați să conectați sau să deconectați nicio parte a aparatului.
- Nu încercați să introduceți obiecte străine în aparat.
- În niciun caz nu încercați să remediați o problemă fără a solicita asistență.
- Dispozitivul WatchPAT[®] ONE nu ar trebui să provoace disconfort sau durere. În cazul în care simțiți disconfort insuportabil, îndepărtați dispozitivul și apălați biroul de asistență.



Itamar Medical Ltd.

9 Halamish Street, PO box 3579
Caesarea Ind. Park, 3088900 Israel
T: +972-4-6177000, F: +972-4-6275598

EC REP

Arazy Group GmbH

The Square 12, Am Flughafen
60549 Frankfurt am Main
Germany

Ghid de instrucțiuni pas cu pas

Scanați codul QR de mai jos pentru a
descărca aplicația WatchPAT[®] ONE



itamar[®]
medical
www.itamar-medical.com



Pentru instrucțiuni video pas cu pas
Accesați watchpatone-howtouse.com



WatchPAT® ONE

Test pentru apnee în somn, de unică folosință, pentru utilizare la domiciliu

Ghid de instrucțiuni pas cu pas


Acest ghid vă va îndruma pas cu pas, arătându-vă cum să utilizați corect testul pentru apnee în somn, pentru utilizare la domiciliu WatchPAT® ONE.

Înainte de a aplica WatchPAT® ONE:

- Se recomandă aplicarea dispozitivului WatchPAT® ONE pe mâna non-dominantă.
- Sonda poate fi purtată pe orice deget, cu excepția degetului mare.
- Înainte de utilizare, îndepărtați hainele strâmte, inelele, ceasurile și alte bijuterii.
- Eliminați lacul de unghii și unghia artificială de pe degetul utilizat pentru test și asigurați-vă că unghia este tăiată scurt.

Notă: Utilizați numai o baterie alcalină AAA. Nu introduceți bateria până când nu sunteți gata de culcare.

- Înainte de a începe studiul de somn, asigurați-vă că aveți acces la internet, telefonul, dispozitivul WatchPAT® ONE și codul PIN.

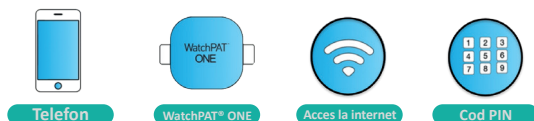

- Descărcați aplicația WatchPAT® ONE pe dispozitivul dvs. mobil (disponibilă în Apple App Store și Google Play).



- Deschideți aplicația WatchPAT® ONE și acordați toate permisiunile cerute de aplicație. Aceste permisiuni sunt necesare pentru funcționarea aplicației.

Scoateți dispozitivul WatchPAT® ONE din cutie. Puteți face clic pe butonul „Previzualizare” din aplicație pentru a face un tur rapid, care vă arată cum să configurați dispozitivul.


PREVIZUALIZARE

Apăsați „Gata” când ați terminat.

GATA


- Introduceți bateria în dispozitivul WatchPAT® ONE.

Apăsați „Următorul pas” când sunteți gata.

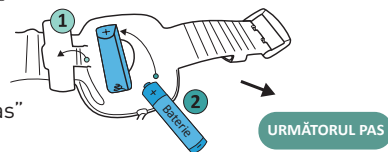

URMĂTORUL PAS

- Scoateți-vă ceasul și bijuteriile de pe mâna la care utilizați testul. Apăsați „Următorul pas” când sunteți gata.

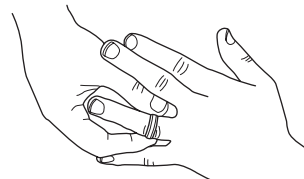


URMĂTORUL PAS

- Introduceți codul PIN din 4 cifre furnizat de cabinetul medicului dvs. sau de furnizorul dvs. și apăsați tasta „Intrare”.



INTRARE

- Puneți dispozitivul WatchPAT® ONE pe mâna non-dominantă. Asigurați-vă că nu este prea strâns și nici prea lejer.

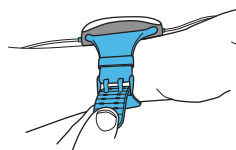

Apăsați „Următorul pas” când sunteți gata.

URMĂTORUL PAS

- Luați senzorul toracic (senzorul pentru sforăit și poziția corpului) și direcționați cablul prin interiorul mânecii și scoateți-l prin deschizătura de la gât. Îndepărtați mica folie de protecție de pe partea adezivă și aplicați senzorul chiar sub creștătura sternului.




Apăsați „Următorul pas” când sunteți gata.

* Dacă dispozitivul WatchPAT® ONE nu include senzorul toracic, săriți peste acest pas.

URMĂTORUL PAS

- Poziționați sonda pe un deget al mâinii non-dominante, introducând degetul până la capăt. Puteți folosi orice deget, cu excepția degetului mare. Sonda trebuie introdusă astfel încât partea adezivă marcată TOP (VÂRF) să fie poziționată deasupra unghiei. Țineți sonda pe o suprafață dură și trageți încet mica folie de protecție de pe suprafața marcată TOP (VÂRF) către dvs. pentru a o scoate din sondă.

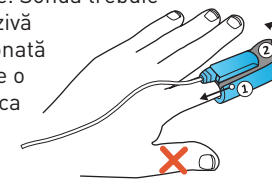

Apăsați „Următorul pas” când sunteți gata.

URMĂTORUL PAS

- Sunteți gata. Ultimii câțiva pași înainte de începerea studiului de somn:

- Asigurați-vă că telefonul se află la cel mult 15 ft/5 metri de dispozitivul WatchPAT® ONE.
- Oprii toate celelalte dispozitive de transmisie din cameră, cum ar fi alte telefoane inteligente, ceasuri inteligente și căști, deoarece acestea ar putea interfera cu testul.
- Conectați-vă telefonul la încărcător; acesta trebuie să rămână în priză toată noaptea. Dacă trebuie să vă ridicați din pat în timpul nopții, lăsați telefonul conectat la priză, nu este nevoie să îl luați cu dvs.

Acum faceți clic pe butonul „Start” pentru a începe studiul de somn.

START

- Dimineața, când vă treziți, apăsați butonul „Sfârșitul înregistrării” și așteptați câteva minute pentru ca dispozitivul să finalizeze transmisia de date. După finalizarea transmisiei de date, veți primi un mesaj de mulțumire.

După primirea mesajului, apăsați „Close Application” (Închidere aplicație).

SFÂRȘITUL ÎNREGISTRĂRII

ÎNCHIDERE APLICAȚIE

- Îndepărtați senzorul toracic, sonda și dispozitivul WatchPAT® ONE. Nu este nevoie să păstrați dispozitivul sau să-l returnați. Îl puteți arunca.