

WatchPAT[®] ONE

Одноразовый домашний тест на апноэ во сне

Для ознакомления с пошаговой
видеоинструкцией посетите веб-сайт

watchpatone-howtouse.com

WatchPAT[®] ONE

Одноразовый домашний тест на апноэ во сне

Техническая информация

Rx only

Внимание: федеральное законодательство разрешает продажу этой продукции только лицензированным практикующим медицинским работникам или по их заказу.



Для одноразового применения. Не использовать повторно



Диапазон рабочих температур: 0°C–40°C



См. Инструкцию по применению

1.5V DC

Рабочее напряжение батареи

IP22

Защита от проникновения влаги



Рабочая часть типа BF

FCC ID

Идентификационный номер Федеральной комиссии связи



Производитель медицинского устройства

REF

Номер по каталогу

SN

Серийный номер



Дата изготовления



Годен до



Изделие маркировано логотипом CE 2797 для BSI

EC REF

Авторизованный представитель в Европейском Союзе



В соответствии с Директивой WEEE 2012/19/EU, все отходы электрического и электронного оборудования (EEE) должны собираться отдельно и не утилизироваться вместе с обычными бытовыми отходами. Утилизируйте данное изделие и все его части ответственным и экологичным способом.



Хрупкое изделие, обращаться с осторожностью



Хранить в сухом месте

По любым вопросам можно
обратиться в службу
поддержки компании
Itamar[®] Medical по тел.
1-888-748-2627

itamar[®]
medical
www.itamar-medical.com



Важные примечания:

- Температура хранения и эксплуатации: 0°C–40°C
- Не пытайтесь подключить или отсоединить какую-либо часть устройства.
- Не пытайтесь вставить в устройство какой-либо посторонний предмет.
- Ни при каких обстоятельствах не пытайтесь решить проблему самостоятельно.
- Устройство WatchPAT[®] ONE не должно вызывать никакого дискомфорта или боли. Если вы столкнетесь с невыносимым дискомфортом, снимите устройство и позвоните в службу поддержки.



Itamar Medical Ltd.

9 Halamish Street, PO box 3579
Caesarea Ind. Park, 3088900 Israel (Израиль)
Тел.: +972-4-6177000, факс: +972-4-6275598

EC REF

Arazy Group GmbH

The Squire 12, Am Flughafen
60549 Frankfurt am Main
Germany (Германия)

Пошаговые инструкции

Отсканируйте QR-код ниже, чтобы
загрузить приложение WatchPAT[®] ONE



itamar[®]
medical
www.itamar-medical.com

Download on the
App Store

ANDROID APP ON
Google play

Для ознакомления с пошаговой видеоинструкцией
посетите веб-сайт watchpatone-howtouse.com



WatchPAT® ONE

Одноразовый домашний тест на апноэ во сне

Пошаговые инструкции


Это руководство шаг за шагом покажет вам, как правильно использовать домашний тест апноэ во сне WatchPAT® ONE.

Перед применением WatchPAT® ONE:

- Рекомендуется использовать устройство WatchPAT® ONE на недоминантной руке.
- Зонд можно надеть на любой палец, кроме большого.
- Перед использованием снимите обтягивающую одежду, кольца, часы и другие украшения.
- Удалите лак для ногтей и искусственные ногти с контрольного пальца и убедитесь, что ноготь коротко подстрижен.

Примечание. Используйте только щелочную батарею типа AAA. Не вставляйте батарею, пока не будете готовы лечь спать.

1. Прежде чем приступить к тестированию своего сна, убедитесь, что у вас есть доступ в Интернет и что вы подготовили свой телефон, устройство WatchPAT® ONE и PIN-код.

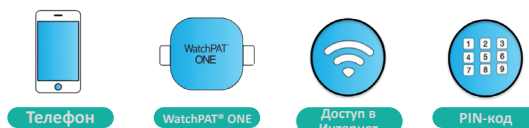

2. Загрузите приложение WatchPAT® ONE на свое мобильное устройство (с Apple App Store или Google Play Store).



3. Откройте приложение WatchPAT® ONE и предоставьте все разрешения, требуемые приложением. Эти разрешения необходимы для работы приложения.


Извлеките устройство WatchPAT® ONE из коробки. Нажав кнопку «Просмотр» в приложении, вы можете пройти краткое обучение тому, как настроить устройство.

ПРОСМОТР

Закончив, нажмите кнопку «Готов».

ГОТОВ


4. Вставьте в устройство WatchPAT® ONE аккумуляторную батарею.

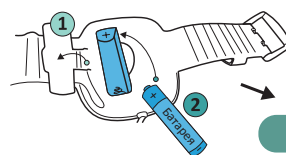

Закончив подготовку, нажмите «Далее».

ДАЛЕЕ


5. Снимите часы и украшения с руки, используемой для теста.

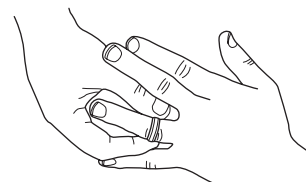


Закончив подготовку, нажмите «Далее».

ДАЛЕЕ

6. Введите 4-значный PIN-код, предоставленный вашим врачом или провайдером, и нажмите «Войти».

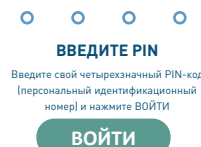

7. Наденьте устройство WatchPAT® ONE на недоминантную руку. Убедитесь, что устройство закреплено не слишком туго и не слишком свободно.

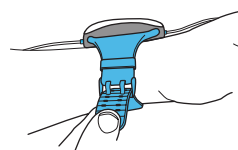

Закончив подготовку, нажмите «Далее».

ДАЛЕЕ

8. Возьмите нагрудный датчик (датчик храпа и положения тела) и пропустите кабель через рукав так, чтобы один конец выходил наружу из рукава, а другой — через вырез горловины. Снимите защитную пленку с клейкой пластины и прикрепите датчик чуть ниже выемки на груди.




Закончив подготовку, нажмите «Далее».

ДАЛЕЕ

* Если в комплект вашего устройства WatchPAT® ONE нагрудный датчик не входит, пропустите этот шаг.

9. Наденьте зонд полностью на палец недоминантной руки так, чтобы палец вошел в зонд до упора. Зонд можно надеть на любой палец, кроме большого. Зонд следует надеть так, чтобы наклейка с надписью TOP (ВЕРХ) располагалась над ногтем. Прижмите зонд к твердой поверхности и медленно потяните ВЕРХНИЙ язычок к себе, чтобы извлечь его из зонда.

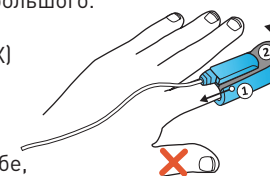

Закончив подготовку, нажмите «Далее».

ДАЛЕЕ

10. Готово. Заключительные шаги, прежде чем вы начнете изучать качество своего сна:

- Убедитесь, что ваш телефон находится на далее 5 метров (15 футов) от устройства WatchPAT® ONE.
- Выключите все находящиеся в комнате другие передающие устройства — другие смартфоны, смарт-часы и наушники, так как они могут помешать проведению теста.
- Подсоедините телефон к зарядному устройству на всю ночь. Если вам нужно встать ночью, оставьте телефон в зарядном устройстве, не нужно носить его с собой.

Теперь нажмите кнопку «Старт», чтобы начать изучение качества сна.

СТАРТ

11. Проснувшись утром, нажмите кнопку «Конец записи» и подождите несколько минут, пока устройство не завершит передачу данных. Когда передача данных завершится, устройство поблагодарит вас.

КОНЕЦ ЗАПИСИ

Получив благодарность, нажмите «Закрыть приложение».

ЗАКРЫТЬ ПРИЛОЖЕНИЕ

12. Снимите нагрудный датчик, зонд и устройство WatchPAT® ONE. Устройство не нужно хранить или возвращать. Его можно просто выбросить.