

WatchPAT⁺ ONE

Teste de apneia do sono caseiro descartável

Para instruções em vídeo passo a passo, visite

watchpatone-howtouse.com

WatchPAT⁺ ONE

Teste de apneia do sono caseiro descartável



Etiquetagem de informações técnicas

	Atenção: a Lei Federal restringe a venda deste dispositivo a, ou mediante prescrição de um médico licenciado
	Descartável, não reutilizar
	Limite da temperatura 0 °C - 40 °C
	Consulte as instruções de utilização
	Tensão de funcionamento da pilha
	Proteção contra infiltrações
	Peça aplicada de tipo BF
	Número de identificação da comissão de comunicações federais
	Fabricante de dispositivos médicos
	Número de referência
	Número de série
	Data de fabrico
	Utilizar até
	De acordo com a Diretiva REEE 2012/19/UE, todos os equipamentos elétricos e eletrónicos (EEE) devem ser recolhidos em separado e não eliminados juntamente com o lixo doméstico comum. Elimine este dispositivo e todas as suas peças de uma forma responsável e amiga do ambiente.
	Frágil, manusear com cuidado
	Mantenha seco
	IC: 27705-WATCHPATONE Número de certificação ISED no Canadá
	HW: WatchPAT ONE Identifica as especificações de hardware de uma versão do produto
	Dispositivo médico
	Símbolos de certificação japonesa

REF: 104075926 - E1.3

Para quaisquer questões, pode contactar o atendimento ao cliente da Itamar[®] Medical através de:
1-888-748-2627

itamar[®]
medical
www.itamar-medical.com



Notas importantes:

- Temperaturas de armazenamento e utilização 0 °C - 40 °C
- Não tente ligar ou desligar qualquer parte da unidade.
- Não tente introduzir objetos estranhos na unidade.
- Não tente, em circunstância alguma, corrigir um problema sozinho.
- O WatchPAT⁺ ONE não deverá causar desconforto ou dor. Em caso de desconforto insuportável, retire o dispositivo e contacte o atendimento ao cliente.
- Inspeccione visualmente a bateria antes de a inserir, para se assegurar de que não está inchada, rachada, a derramar líquido ou tem outro defeito.

Itamar Medical Ltd.
9 Halamish Street, PO 3579
Caesarea 3088900, Israel
T: +972-4-6177000, F: +972-4-6275598

EC REP Arazy Group GmbH
The Square 12, Am Flughafen,
60549 Frankfurt am Main
Alemanha

Guia de instruções passo a passo

Leia o código QR abaixo para transferir a aplicação WatchPAT[®] ONE



itamar[®]
medical
www.itamar-medical.com

Para instruções em vídeo passo a passo, visite watchpatone-howtouse.com



WatchPAT® ONE

Teste de apneia do sono caseiro descartável

Guia de instruções passo a passo


Este guia orienta-o passo a passo e mostra-lhe como utilizar corretamente o Teste de Apneia do Sono Caseiro WatchPAT® ONE.

Antes de colocar o WatchPAT® ONE:

- ✦ É recomendável colocar o dispositivo WatchPAT® ONE na sua mão não dominante.
- ✦ A sonda pode ser usada em qualquer dedo, à exceção do polegar.
- ✦ Remova qualquer vestuário apertado, anéis, relógios e outros artigos de bijuteria.
- ✦ Remova o verniz das unhas e as unhas artificiais do dedo de teste e certifique-se de que a unha está cortada rente.

Nota: utilize apenas baterias alcalinas AAA. Não insira a bateria até estar pronto para ir para a cama.

1. Antes de começar o estudo do sono, certifique-se de que tem acesso à Internet, ao telemóvel, ao dispositivo WatchPAT® ONE e ao número PIN.

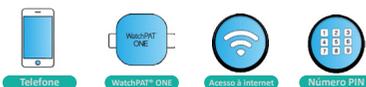

2. Descarregue a aplicação WatchPAT® ONE para o seu dispositivo móvel (disponível na Apple Store da Apple e na Play Store da Google).



3. Abra a aplicação WatchPAT® ONE e autorize todas as permissões solicitadas pela aplicação. Estas permissões são necessárias para o funcionamento da aplicação.


Retire o WatchPAT® ONE da caixa. Pode clicar no botão "Pré-visualizar" na aplicação para ver uma demonstração rápida da configuração do dispositivo.

PRÉ-VISUALIZAR

Prima o botão "Preparado" quando terminar.

PREPARADO


4. Introduza a bateria no dispositivo WatchPAT® ONE.

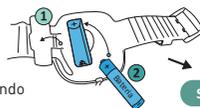

Prima "Seguinte" quando terminar.

SEGUINTE

5. Retire o relógio e as joias da sua mão do teste.

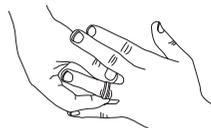

Prima "Seguinte" quando terminar.

SEGUINTE

6. Introduza o código PIN de 4 dígitos que lhe foi fornecido pelo profissional de saúde ou gabinete fornecedor e prima "Entrar".



ENTRAR

7. Coloque o dispositivo WatchPAT® ONE na sua mão não dominante. Certifique-se de que não fica nem demasiado apertado nem demasiado solto.



Prima "Seguinte" quando terminar.

SEGUINTE

8. Pegue no sensor do peito (sensor de ressonar e posição corporal] e direcione o cabo inserindo-o pela sua manga e retirando-o pela abertura no pescoço. Remova a proteção do adesivo e cole o sensor logo abaixo do manúbrio.




Prima "Seguinte" quando terminar.

* Se o seu dispositivo WatchPAT® ONE não incluir o sensor de peito, ignore este passo.

SEGUINTE

9. Coloque a sonda até ao fundo do dedo da sua mão não dominante. Pode usar qualquer dedo à exceção do polegar. A sonda deve ficar inserida de forma a que o adesivo assinalado com "TOP" (para cima) fique posicionado por cima da unha. Segure na sonda contra uma superfície rígida e lentamente puxe o adesivo TOP na sua direção, de forma a removê-lo da sonda. Prima "Seguinte" quando terminar.

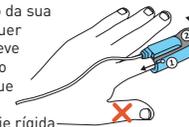

SEGUINTE

10. A configuração está concluída. Últimos passos antes de começar o estudo do sono:
 - a. Certifique-se de que o seu telemóvel está a uma distância máxima de 5 metros do dispositivo WatchPAT® ONE.
 - b. Desligue todos os outros dispositivos transmissores presentes na divisão tais como relógios inteligentes, outros smartphones e auscultadores, uma vez que podem interferir com o teste.
 - c. Ligue o seu telemóvel ao carregador; deve permanecer ligado durante toda a noite. Se precisar de se levantar durante a noite deixe o telemóvel a carregar, não é preciso levá-lo consigo.

Agora clique no botão "Iniciar" para dar início ao estudo do sono.

INICIAR

11. De manhã quando acordar, prima o botão "Terminar gravação" e aguarde alguns minutos até que o dispositivo termine a transmissão de dados. Depois de concluir a transmissão de dados, irá receber uma mensagem de agradecimento.

TERMINAR GRAVAÇÃO

Uma vez recebida, prima "Fechar app".

FECHAR APP

12. Retire o sensor do peito, a sonda e o dispositivo WatchPAT® ONE.

Fora dos EUA: Não é preciso guardar o dispositivo ou devolvê-lo. Pode simplesmente descartá-lo.

Nos EUA: Se quiser fazer parte do programa WatchPAT® ONE Green, pode devolver o dispositivo com a etiqueta de devolução pré-paga fornecida. Depois de concluído o teste, coloque o dispositivo na caixa, cole a etiqueta na caixa como mostrado, e envie-nos para tratamento adequado a fim de proteger o meio ambiente. Este serviço não tem custos. Se optar por não participar no programa WatchPAT® ONE Green, não necessita de guardar o dispositivo ou de o devolver. Pode simplesmente descartá-lo.