

WatchPAT[®] ONE

Тест за сънна апнея за еднократна употреба

За видеоинструкции стъпка по стъпка, моля, посетете

watchpatone-howtouse.com

WatchPAT[®] ONE

Домашен тест за сънна апнея за еднократна употреба

Етикет с техническа информация

	Внимание: Федералното законодателство ограничава продажбата на това устройство само по поръчка от правоспособно медицинско лице.
	За еднократна употреба, да не се използва повторно
	Температурни ограничения 0 °C - 40 °C
	Викте инструкциите за употреба
	1.5V DC max
	Защита срещу проникване
	Медицински контакт навън тип BF
	Идентификационен номер на Федералната комисия по далекосъобщенията
	Производител на медицинското изделие
	Каталожен номер
	Сериен номер
	Дата на производство
	Срок на годност
	Съгласно Директивата относно ОЕО 2012/19/ЕС, всички отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕО) трябва да се събират раздельно и да не се третират заедно с обикновени битови отпадъци. Моля, третирайте отпадъците от този продукт и частите му по отговорен начин, щадящ околната среда.
	Чуливо, да се внимава при използване
	Продуктът трябва да се поддържа сух
IC: 27705-WATCHPATONE Сертификационен номер на ISED Canada	
NULB: WatchPAT ONE Идентифицира хардуерните спецификации на версия на продукта	
	Медицинско изделие
	Японски сертификационни символи

0002193404 - Ed. 3

Ако имате въпроси,
можете да се свържете
с помощния център
на Itamar[®] Medical на
телефон:
1-888-748-2627

itamar[®]
medical
www.itamar-medical.com



Важни забележки:

- Температура на съхранение и работа: 0°C - 40°C
- Не се опитвайте да съхранявате или разглобявате части от устройството.
- Не се опитвайте да поставите чужди предмети в устройството.
- При никакви обстоятелства не се опитвайте сами да отстранявате проблеми в устройството.
- WatchPAT[®] ONE не би трябвало да причинява дискомфорт или болка. Ако изпитате непоносим дискомфорт, отстранете устройството и се обадете на помощния център.
- Проверете визуално батерията преди да я поставите, за да се уверите, че не е издута, напухнала, не тече и няма други дефекти.



Itamar Medical Ltd.
9 Halamish Street, PO 3579
Caesarea 3086900 Israel
T: +972-4-6177000, Ф: +972-4-6275598

EC REP Arazy Group GmbH
The Square 12, Am Flughafen
60549 Frankfurt am Main
Germany

Инструкции стъпка по стъпка

Сканирайте QR кода по-долу, за да изтеглите приложението WatchPAT[®] ONE



itamar[®]
medical
www.itamar-medical.com

За видеоинструкции стъпка по стъпка
посетете watchpatone-howtouse.com



WatchPAT® ONE

Домашен тест за сънна апнея за еднократна употреба Инструкции стъпка по стъпка

Това ръководство ще Ви води стъпка по стъпка и ще Ви покаже как да използвате правилно домашния тест за сънна апнея WatchPAT® ONE.

Преди да приложите WatchPAT® ONE:

- Препоръчително е да поставите устройството WatchPAT® ONE на недоминиращата си ръка.
- Сондата може да се носи на всеки пръст с изключение на палеца.
- Преди употреба сваляте тесните дрехи, пръстени, часовници и други бижута.
- Отстранете всякакъв лак или изкуствени нокти от пръста на ръката, който ще бъде използван за изследването, и се уверете, че нокътят му е късо изрязан.

Забележка: Използвайте само алкална батерия AAA. Не поставяйте батерията, докато не сте готови за лягане.

1. Преди да продължите с изследването на съня си, уверете се, че имате достъп до интернет, вашия телефон, устройството WatchPAT® ONE и ПИН код.



2. Изтеглете приложението WatchPAT® ONE на мобилното си устройство (предлага се в Apple App Store и Google Play Store).



3. Отворете приложението WatchPAT® ONE и позволете всички изисквани от него разрешения. Тези разрешения са необходими, за да работи приложението.

Извадете WatchPAT® ONE от кутията. Можете да кликнете бутона „Preview“ в приложението, за да направите бърза обиколка, показваща как да настроите устройството.


Когато сте готови, натиснете бутона „Ready“.

ПРЕГЛЕД

ГОТОВО

4. Поставете батерията в устройството WatchPAT® ONE.

Когато сте готови, натиснете „Next“.

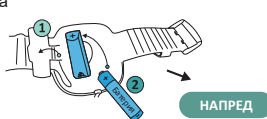

НАПРЕД

5. Отстранете часовника и бижутата от тестваната си ръка.

Когато сте готови, натиснете „Next“.



НАПРЕД


6. Въведете 4-цифрения ПИН код, предоставен от лекарския кабинет или доставчика, и натиснете „Enter“

ВЪВЕДИ ПИН
Вашите предоставени Ви четирицифрен ПИН (или код идентификационен номер) и докоснете ENTER

ВЪВЕДИ

7. Поставете устройството WatchPAT® ONE на недоминиращата си ръка. Уверете се, че не е нито прекалено стегнато, нито прекалено хлабаво.

Когато сте готови, натиснете „Next“.

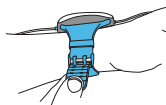

НАПРЕД

8. Вземете сензора за гръдния кош (сензор за хъркане и положение на тялото) и прекарайте кабела през ръкава си и навън през деколтето. Отстранете лепенката от стикера и прикрепете сензора точно под гръдната вдлъбнатина.


Когато сте готови, натиснете „Next“.

* Ако Вашето устройство WatchPAT® ONE не включва сензор за гръдния кош, пропуснете тази стъпка.



НАПРЕД

9. Поставете сондата докрай върху пръста на Вашата недоминираща ръка. Можете да използвате всички пръсти освен палеца. Сондата трябва да се постави така, че стикерът с надпис TOP да е разположен над нокътя. Притиснете сондата към твърда повърхност и бавно издърпайте стикера TOP към себе си, за да го извадите от сондата.

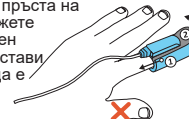

Когато сте готови, натиснете „Next“.

НАПРЕД

10. Вече сте готови. Последни няколко стъпки преди да започнете изследването на съня си:
 - а. Уверете се, че телефонът Ви се намира на не повече от 15 фута/5 метра от устройството WatchPAT® ONE.
 - б. Изключете всички други излъчващи устройства в помещението, като други смартфони, смарт часовници и слушалки, тъй като те могат да попречат на теста.
 - в. Свържете телефона си към зарядното устройство – той трябва да остане включен през цялата нощ. Ако Ви се наложи да станете през нощта, оставете телефона включен – не е необходимо да го носите със себе си.Сега кликнете бутона „Start“, за да започнете изследването на съня си.

НАЧАЛО

11. На сутринта, когато се събудите, натиснете бутона „End Recording“ и изчакайте няколко минути, докато устройството не завърши предаването на данните. След приключване на предаването на данните ще получите благодарствено съобщение.

След като го получите, натиснете „Close Application“.

КРАЙ НА ЗАПИСВАНЕТО

ЗАТВОРИ ПРИЛОЖЕНИЕТО

12. Отстранете сензора за гръдния кош, сондата и устройството WatchPAT® ONE.

Извън САЩ: Не е необходимо да запазвате устройството или да го връщате. Можете просто да го изхвърлите.

За САЩ: Ако искате да сте част от WatchPAT® ONE Green Program, можете да върнете устройството с предоставения предплатен етикет за връщане. След завършване на теста поставете устройството в кутията, запелете етикета върху кутията, както е показано, и ни го изпратете за правилна обработка, за да защитим околната среда. Това не е цена за тази услуга. Ако решите да не участвате в WatchPAT® ONE Green Program, не е необходимо да запазвате устройството или да го връщате. Можете просто да го изхвърлите.