

WatchPAT[®] ONE

Jednokratni kućni test za apneju u snu

Videozapis s postupnim uputama
potražite na

watchpatone-howtouse.com

WatchPAT[®] ONE

Jednokratni kućni test za apneju u snu



Označavanje tehničkih podataka

	Ogled: Savezni zakon SAD-a ograničava prodaju ovog uređaja samo po nalogu ili posredstvom licenciranog liječnika.
	Za jednokratnu uporabu, nemojte ponovno koristiti
	Ograničenje temperature 0 °C – 40 °C
	Pogledajte upute za uporabu
	Radni napon baterije
	Stupanj zaštite
	Dio u kontaktu s pacijentom tipa BF
	Identifikacijski broj Savezne komisije za komunikacije
	Proizvođač medicinskog uređaja
	Kataloški broj
	Serijski broj
	Datum proizvodnje
	Upotrijebiti do
	Prema direktivi 2012/19/EU o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi (OEEU), svu otpadnu električnu i elektroničku opremu (EEO) treba sakupljati odvojeno i ne oslagati s uobičajenom kućnom otpadom. Odbacite ovaj proizvod i sve njegove dijelove na odgovaran i ekološki prihvatljiv način.
	Lomljivo, pažljivo rukovati
	Držati na suhom
	IC: 27705-WATCHPATONE Certifikacijski broj Ministarstva inovacija, znanosti i okoliša Kanade
	HVIN: WatchPAT ONE Identificira specifikacije hardvera verzije proizvoda
	Medicinski uređaj
	Japanski certifikacijski simboli

Ako imate pitanja, možete
se obratiti službi za pomoć
tvrtke Itamar[®] Medical na:
1-888-748-2627

itamar[®]
medical
www.itamar-medical.com

Vodič s postupnim uputama

Skenirajte QR kod u nastavku kako biste
preuzeli aplikaciju WatchPAT[®] ONE



itamar[®]
medical
www.itamar-medical.com



Važne napomene:

- Temperatura čuvanja i radna temperatura 0 °C – 40 °C
- Ne pokušavajte spojiti ili odspojiti bilo koji dio jedinice.
- Ne pokušavajte uvesti bilo koji strani predmet u jedinicu.
- Ni pod kojim uvjetima ne pokušavajte sami riješiti problem.
- WatchPAT[®] ONE ne bi trebao izazvati nikakvu nelagodu ili bol. Ako osjetite nepodnošljivu nelagodu, uklonite uređaj i nazovite službu za pomoć.
- Vizualno pregledajte bateriju prije umetanja kako biste bili sigurni da nije natečena, napuknuta, da nema curenja ili bilo kojeg drugog kvara.



Itamar Medical Ltd.
9 Halamish Street, PO 3579
Caesarea 3086900 Izrael
T: +972-4-6177000, F: +972-4-6275598



Arazy Group GmbH
The Square 12, Am Flughafen
60549 Frankfurt am Main
Njemačka

Videozapis s postupnim uputama potražite na
watchpatone-howtouse.com



WatchPAT® ONE

Jednokratni kućni test za apneju u snu

Vodič s postupnim uputama

Ovaj vodič sadržava postupne upute i pokazuje pravilnu uporabu kućnog testa za apneju u snu WatchPAT® ONE.

Prije primjene uređaja WatchPAT® ONE:

- Preporučuje se da uređaj WatchPAT® ONE stavite na nedominantnu ruku.
- Sonda se može nositi na bilo kojem prstu, osim na palcu.
- Prije uporabe skinite usku odjeću, prstenje, satove i drugi nakit.
- Odstranite lak za nokte i umjetne nokte s testnog prsta i provjerite je li nokat kratko odsječen.

Napomena: Koristite isključivo alkalnu bateriju AAA. Nemojte umetati bateriju dok niste spremni za spavanje.

1. Prije nego što nastavite s ispitivanjem sna, provjerite imate li pristup internetu, telefon, uređaj WatchPAT® ONE i PIN broj.



Telefon



WatchPAT® ONE



Pristup internetu



PIN broj

2. Preuzmite aplikaciju WatchPAT® ONE na mobilni uređaj (dostupna je u trgovinama Apple App Store i Google Play Store).



3. Otvorite aplikaciju WatchPAT® ONE i dajte sve dozvole potrebne aplikaciji. Te su dozvole potrebne kako bi aplikacija mogla raditi.

Izvadite WatchPAT® ONE iz kutije. Možete kliknuti gumb Preview (Pregledaj) kako biste prošli kroz kratki obilazak koji pokazuje kako postaviti uređaj.


EELVADE

Pritisnite gumb Ready (Spremno) kada završite.

SPREMNO

4. Umetnite bateriju u uređaj WatchPAT® ONE.


Pritisnite Next (Sljedeće) kada završite.

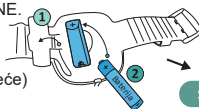

SLJEDEĆE

5. Skinite sat i nakit s ruke na kojoj ćete izvršiti testiranje.

Pritisnite Next (Sljedeće) kada završite.

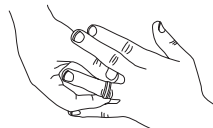

SLJEDEĆE


6. Unesite četveroznamenkasti PIN kod koji ste dobili od liječnika ili pružatelja usluga i pritisnite Enter (Unos).

UNESITE PIN
Unesite dodijeljeni četveroznamenkasti PIN (poslasti identifikacijski broj) i dodajte ENTER (Unos)

UNOS

7. Stavite uređaj WatchPAT® ONE na nedominantnu ruku. Provjerite da nije prejako ili prelabavo postavljen.

Pritisnite Next (Sljedeće) kada završite.

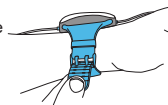

SLJEDEĆE

8. Uzmite senzor za prsni koš (senzor za hrkanje i položaj tijela) i provucite kabel kroz rukav te kroz otvor na vratu. Uklonite jezičak s naljepnice i pričvrstite senzor neposredno ispod ureza prsne kosti.


Pritisnite Next (Sljedeće) kada završite.



SLJEDEĆE

* Ako uređaj WatchPAT® ONE ne sadržava senzor za prsni koš, preskočite ovaj korak.

9. Postavite sondu do kraja na prst nedominantne ruke. Možete postaviti na bilo koji prst osim na palac. Sondu trebate postaviti tako da se naljepnica s oznakom TOP nalazi iznad nokta. Držite sondu uz tvrdnu površinu i polagano povlačite jezičak s oznakom TOP prema sebi kako biste ga izvadili iz sonde.

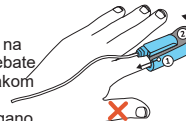

Pritisnite Next (Sljedeće) kada završite.

SLJEDEĆE

10. Sve je spremno. Nekoliko posljednjih koraka prije nego što započnete ispitivanje sna:

- a. Provjerite nalazi li se telefon najviše 5 metara od uređaja WatchPAT® ONE.
- b. Isključite sve uređaje za odašiljanje u sobi, poput drugih pametnih telefona, pametnih satova i slušalica, jer mogu ometati test.
- c. Priključite telefon na punjač, jer mora biti uključen tijekom cijele noći. Ako trebate ustati tijekom noći, ostavite telefon uključen i ne trebate ga nositi sa sobom.

Zatim kliknite gumb Start (Započni) kako biste započeli ispitivanje sna.

SLJEDEĆE

11. Ujutro kada se probudite, pritisnite gumb End Recording (Završi snimanje) i pričekajte nekoliko minuta dok uređaj ne dovrši prijenos podataka. Nakon što se prijenos podataka dovrši, primit ćete poruku zahvale.

Kada primite poruku, pritisnite Close Application (Zatvori aplikaciju).

ZAVRŠI SNIMANJE

ZATVORI APLIKACIJU

12. Skinite senzor za prsni koš, sondu i uređaj WatchPAT® ONE.

Za države izvan SAD-a: Uređaj ne morate zadržati ili ga vraćati. Možete ga jednostavno baciti.

Za SAD: Ako želite sudjelovati u programu WatchPAT® ONE Green Program uređaj možete vratiti s priloženom unaprijed plaćenom povratnom oznakom. Nakon dovršetka testa vratite uređaj u kutiju, zalijepite oznaku na kutiju kao što je prikazano i pošaljite nam na pravilnu obradu radi zaštite okoliša. Ova je usluga besplatna. Ako odlučite ne sudjelovati u programu WatchPAT® ONE Green Program uređaj ne morate zadržati ili ga vraćati. Možete ga jednostavno baciti.