

WatchPAT ONE

Jednorázový domácí test na spánkovou apnoe

Podrobné video pokyny jsou
k dispozici na adrese

watchpatone-howtouse.com

WatchPAT ONE

Jednorázový domácí test na spánkovou apnoe



Síťek s technickými informacemi

	Podle federálních zákonů USA smí toto zařízení prodávat nebo objednávat pouze praktický lékař, který je k tomu oprávněn
	Jednorázové použití, nepoužívejte opakovaně
	Teplotní limit 0 °C - 40 °C
	Přečtěte si pokyny k použití
	Provozní napětí baterie
	Ochrana proti vlhku a prachu
	Příloha část typu BF
	Identifikační číslo Federální komunikační komise (Federal Communications Commission)
	Výrobce zdravotnického prostředku
	Katalogové číslo
	Sériové číslo
	Datum výroby
	Datum minimální trvanlivosti
	V souladu se směrnicí OEEZ 2012/19/EU by se měla veškerá elektrická a elektronická zařízení (EEZ) shromažďovat samostatně, nikoliv spolu s běžným komunikačním odpadem. Tento produkt a veškeré jeho součásti likvidujte odpovídajícím způsobem s ohledem na životní prostředí.
	Křehké, manipulujte opatrně
	Uchovávejte v suchu
	IC: 27705-WATCHPATONE Číslo certifikace ISED Canada
	HFV: WatchPAT ONE Identifikuje hardwarové parametry dané verzí produktu
	Zdravotnický prostředek
	Symbole pro japonskou certifikaci

REF: OM219,3486 - Ed. 3

S případnými dotazy se
obracejte na podporu
společnosti
Itamar® Medical
na tel. čísle:
1-888-748-2627

www.itamar-medical.com



Důležité poznámky:

- Skladovací a provozní teplota 0 °C – 40 °C
- Žádnou část jednotky se nepokoušejte připojit nebo odpojit.
- Nepokoušejte se do jednotky zasouvat žádný cizí předmět.
- Za žádných okolností se nepokoušejte opravit závadu sami.
- Použití testu WatchPAT ONE by nemělo působit žádné nepříjemné pocity ani bolest. Pokud byste trpěli nesnesitelně nepříjemnými pocity, přístroj sundejte a kontaktujte telefonicky podporu.
- Baterii před vložení vizuálně zkontrolujte, zda není zdeformovaná, prasklá, neteče nebo nevykazuje jinou vadu.



Itamar Medical Ltd.

9 Halamish Street, PO 3579
Caesarea 3086900, Izrael
T: +972-4-6177000, F: +972-4-6275598

EC REP Arazy Group GmbH

The Square 12, Am Flughafen
60549 Frankfurt am Main
Německo

Podrobný návod k použití

Pro stažení aplikace WatchPAT ONE
naskenujte níže uvedený QR kód.



Podrobné video pokyny jsou k dispozici na adrese
watchpatone-howtouse.com

WatchPAT® ONE

Jednorázový domácí test na spánkovou apnoe

Podrobný návod k použití

Tento návod vás podrobně provede celým postupem a ukáže vám, jak správně používat domácí test na spánkovou apnoe WatchPAT® ONE.

Před použitím přístroje WatchPAT® ONE:

- Přístroj WatchPAT® ONE se doporučuje přiložit na ruku, která není dominantní.
- Snímač lze přiložit na libovolný prst kromě palce.
- Před použitím si sundejte těsný oděv, prsteny, hodinky a jiné šperky.
- Z testovaného prstu odstraňte lak na nehty a umělý nehet a zkontrolujte, že je nehet krátce ostříhaný.

Poznámka: Používejte pouze alkalické baterie typu AAA. Baterie do přístroje nevkładejte, dokud nejste připraveni uložit se ke spánku.

1. Než budete provádět spánkovou studii, zkontrolujte, zda máte přístup na internet, svůj telefon, přístroj WatchPAT® ONE a kód PIN.



Telefon



WatchPAT® ONE



Přístup na internet



Kód (PIN)

2. Do svého mobilního zařízení si stáhněte aplikaci WatchPAT® ONE (k dispozici v obchodě Apple App Store a Google Play).



3. Otevřete aplikaci WatchPAT® ONE a povolte všechna oprávnění, která aplikace vyžaduje. Tato oprávnění jsou nezbytná, aby aplikace správně fungovala.


Vyjměte přístroj WatchPAT® ONE z krabice. V aplikaci můžete kliknout na tlačítko Preview (Náhled), které vás krátce provede nastavením přístroje.

NÁHLED

Po skončení stiskněte tlačítko Ready (Připraven).

PŘIPRAVEN

4. Vložte do přístroje WatchPAT® ONE baterie.

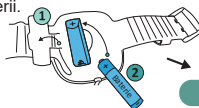

Po vložení stiskněte tlačítko Next (Další).

5. Z ruky, na které provádíte test, si sundejte hodinky a šperky.



Po vložení stiskněte tlačítko Next (Další).


DALŠÍ

6. Zadejte 4místný kód PIN, který jste obdrželi od svého lékaře nebo poskytovatele zdravotní péče, a stiskněte Enter.



ENTER

7. Přístroj WatchPAT® ONE umístěte na ruku, která není dominantní. Dbejte na to, aby přístroj nebyl příliš utažený, ale ani volný.

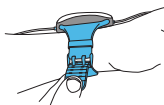

Po vložení stiskněte tlačítko Next (Další).

DALŠÍ

8. Vezměte hrudní snímač (snímač chrápání a polohy těla) a protáhněte kabel rukávem a výstřihem u krku. Sundejte krytku z lepicí plochy a snímač upevněte těsně pod krční jamku.




Po vložení stiskněte tlačítko Next (Další).

*Pokud váš přístroj WatchPAT® ONE hrudní snímač neobsahuje, tento krok vynechte.

DALŠÍ

9. Umístěte snímač na prst na nedominantní ruce co nejdále to půjde. Lze použít libovolný prst kromě palce. Snímač je nutné zasunout tak, aby lepicí plocha označená TOP (horní strana) byla umístěna nad nehtem. Zatlacete snímačem proti tvrdému povrchu, uchopte konec pásky s označením TOP (horní strana), zatáhněte za ni a odstraňte ji ze snímače.

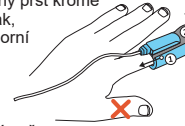

Po vložení stiskněte tlačítko Next (Další).

DALŠÍ

10. Nyní jste připraveni.

A nyní pár posledních kroků, než zahájíte spánkovou studii:

- a. Dbejte na to, aby se váš telefon nenacházel dále než 5 metrů (15 stop) od přístroje WatchPAT® ONE.
- b. Vypněte prosím všechna přenosová zařízení v místnosti, např. jiné chytré telefony, chytré hodinky a sluchátka, protože by mohla testování rušit.
- c. Připojte telefon na nabíječku, na které musí zůstat připojen po celou noc. Musíte-li v noci vstát, nechte telefon zapojený, nemusíte jej nosit s sebou.

Nyní klikněte na tlačítko Start (Spustit) a zahajte spánkovou studii.

SPUSTIT

11. Ráno po probuzení stiskněte tlačítko End Recording (Ukončit záznam) a vyčkejte několik minut, než přístroj dokončí přenos dat. Po dokončení přenosu dat se zobrazí zpráva s poděkováním.

Až ji obdržíte, stiskněte tlačítko Close Application (Zavřít aplikaci).

UKONČIT ZÁZNAM

ZAVŘÍT APLIKACI

12. Sundejte hrudní snímač, snímač z prstu a přístroj WatchPAT® ONE.

Pro uživatele mimo USA: Není nutné si přístroj ponechávat ani jej vracet. Stačí zlikvidovat.

Pro USA: Chcete-li být součástí programu WatchPAT® ONE Green Program, můžete přístroj vrátit spolu s předplaceným štítkem pro vrácení, který jste obdrželi. Po dokončení testu vložte přístroj do krabičky, krabičku opečatete štítkem dle obrázku, a zašlete nám jej k řádnému ekologickému zpracování. Tato služba je bezplatná. Rozhodnete-li se programu WatchPAT® ONE Green Program neúčastnit, nemusíte si přístroj ponechávat ani jej vracet. Stačí jej zlikvidovat.