

WatchPAT[®] ONE

Jednorazový domáci test spánkového apnoe

Ak si chcete pozrieť podrobné video
s pokynmi, navštívte stránky

watchpatone-howtouse.com

WatchPAT[®] ONE

Jednorazový domáci test spánkového apnoe



Technické informácie

	Upozornenie: federálne zákony obmedzujú predaj tohto zariadenia iba na pokyn alebo objednávku lekára
	Iba na jednorazové použitie, nepoužívajte opakovane
	Teplotný limit 0°C – 40°C
	Prečítajte si návod na použitie
	Prevádzkové napätie batérie
1.5V DC	
IP22	Stupeň ochrany proti vniknutiu
	Aplikovaná súčasť typu BF
	Identifikačné číslo FCC
24P-B0106	
	Výrobca zdravotníckeho zariadenia
	Katalógové číslo
	Výrobné číslo
	Dátum výroby
	Dátum použiteľnosti
	Podľa smernice o OEEZ č. 2012/19/EU sa majú všetky odpady elektrické a elektronické zariadenia (EEZ) zbierať separovane a nesmú sa likvidovať s bežným domovým odpadom. Tento produkt a všetky jeho súčasti zbierajte zodpovedným spôsobom, ktorý je šetrný k životnému prostrediu.
	Krehké, manipulujte opatrne
	Uchovávajte v suchom prostredí
IC: 27705-WATCHPATONE Certifikačné číslo ISO Canada	
HVIN: WatchPAT ONE Identifikuje hardvérové špecifikácie verzie produktu	
	Zdravotnícka pomôcka
	Japonské certifikačné symboly

REF:OMC193M91-Ed. 3

**Ak máte akékoľvek otázky,
obráťte sa na asistenčnú
linku spoločnosti
Itamar[®] Medical na čísle:
1-888-748-2627**

itamar[®]
medical
www.itamar-medical.com



Dôležité poznámky:

- Teplota pri skladovaní a prevádzkovej teplote 0°C – 40°C
- Nepokúšajte sa pripájať ani odšpláčať žiadnu časť tejto jednotky.
- Nepokúšajte sa zasunúť žiadny cudzí predmet do jednotky.
- Za žiadnych okolností sa nesnažte odstrániť prípadný problém vlastnými silami.
- Použitie pomôcky WatchPAT[®] ONE nesmie spôsobovať žiadne nepohodlie ani bolesť. Ak pocítite neznesiteľný diskomfort, odpojte pomôcku a zatelefonujte na asistenčnú linku.
- Pred vložením batérie ju vizuálne skontrolujte, či nie je napučaná, prasknutá, či z nej nevychádza tekutina alebo či nemá inú poruchu.



Itamar Medical Ltd.
9 Halamish Street, PO 3579
Caesarea 3086900 Izrael
T: +972-4-6177000, F: +972-4-6275598



Arazy Group GmbH
The Square 12, Am Flughafen
60549 Frankfurt am Main
Nemecko

Podrobný návod na použitie

Naskenujte kód QR uvedený nižšie
a stiahnite si aplikáciu WatchPAT[®] ONE



itamar[®]
medical
www.itamar-medical.com

Video s podrobnými pokynmi nájdete na
stránkach watchpatone-howtouse.com



WatchPAT® ONE

Jednorazový domáci test

spánkového apnoe

Podrobný návod na použitie

V tejto príručke nájdete podrobné pokyny na správne používanie domáceho testu spánkového apnoe WatchPAT® ONE.

Pred použitím pomôcky WatchPAT® ONE:

- Odporúčame, aby ste si pomôcku WatchPAT® ONE nasadili na nedominantnú ruku.
- Sondu môžete mať na ktoromkoľvek prste okrem palca.
- Pred použitím si odložte tesný odev, prstene, hodinky a inú bižutériu.
- Z testovaného prsta odstráňte lak na nechty a umelý necht a ostrihajte si necht.

Poznámka: Používajte výlučne alkalickú batériu typu AAA. Batériu vkladajte až vtedy, keď budete pripravení na odchod do postele.

1. Než začnete so spánkovou štúdiou, overte, či máte prístup na internet, telefón, pomôcku WatchPAT® ONE a kód PIN.



Telefón



WatchPAT® ONE



Prístup na internet



Kód PIN

2. Stiahnite si aplikáciu WatchPAT® ONE do mobilného zariadenia (k dispozícii v službách Apple App Store a Google Play Store).



3. Otvorte aplikáciu WatchPAT® ONE a udeľte všetky povolenia požadované aplikáciou. Tieto povolenia sú potrebné na fungovanie aplikácie.


Vyberte pomôcku WatchPAT® ONE z obalu. V aplikácii môžete kliknúť na tlačidlo „Preview“ (Ukážka) a absolvovať stručnú prehliadku s vysvetlením nastavenia pomôcky.

Po dokončení stlačte tlačidlo „Ready“ (Pripravený).

UKÁŽKA

PRIPRAVENÝ


4. Do pomôcky WatchPAT® ONE vložte batériu.

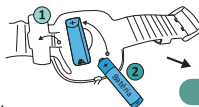

Po dokončení stlačte tlačidlo „Next“ (Ďalej).

ĎALEJ

5. Z testovanej ruky si zložte hodinky a bižutériu.

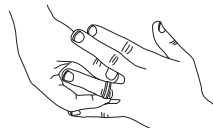

Po dokončení stlačte tlačidlo „Next“ (Ďalej).


ĎALEJ

6. Zadajte 4-ciferný kód PIN poskytnutý ambulanciou lekára alebo poskytovateľom a stlačte tlačidlo „Enter“ (Zadať).

ZADAJTE KÓD PIN
Zadajte vám priradený štvorciferný kód PIN (osobné identifikačné číslo) a kliknite na položku ENTER (Zadať)

ZADAŤ

7. Nasadte si pomôcku WatchPAT® ONE na nedominantnú ruku. Nesmie byť nasadená ani príliš natesno ani príliš voľne.

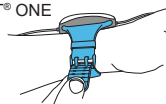

Po dokončení stlačte tlačidlo „Next“ (Ďalej).

ĎALEJ

8. Vezmite si hrudný snímač (snímač chrápania a polohy tela) a vedzte kábel rukávom von cez otvor na krku. Odpojte uško z nalepovacej časti a pripojte snímač k telu bezprostredne pod zárez nad hrudnou kosťou a pod krkom.



Po dokončení stlačte tlačidlo „Next“ (Ďalej).

ĎALEJ

* Ak pomôcka WatchPAT® ONE neobsahuje hrudný snímač, tento krok vynechajte.

9. Úplne nasuňte sondu na prst nedominantnej ruky. Môžete použiť ktorýkoľvek prst okrem palca. Sonda má byť nasunutá tak, aby sa nálepka označená TOP nachádzala nad nechtom.



Podržte sondu na tvrdom povrchu a pomalým ťahom uška s označením TOP smerom k sebe uško zo sondy odpojte.

Po dokončení stlačte tlačidlo „Next“ (Ďalej).

ĎALEJ

10. Teraz je všetko nastavené.

Posledných niekoľko krokov, než začnete so spánkovou štúdiou:

- a. Dbajte na to, aby sa váš telefón nachádzal najviac 15 stôp/5 m od pomôcky WatchPAT® ONE.
- b. Vypnite všetky ostatné vysielace v miestnosti (napríklad ďalšie mobilné telefóny, inteligentné hodinky a slúchadlá) – mohli by rušiť priebeh testu.
- c. Pripojte telefón k nabíjačke – telefón musí ostať pripojený celú noc. Ak potrebujete v noci vstať, nechajte telefón pripojený (nie je potrebné, aby ste si ho vzali so sebou).

Kliknutím na tlačidlo „Start“ (Spustiť) spustíte svoju spánkovú štúdiu.

SPUŠTIŤ

11. Keď sa ráno zobudíte, stlačte tlačidlo „End Recording“ (Skončiť záznam) a niekoľko minút počkajte, kým pomôcka dokončí prenos údajov. Po dokončení prenosu údajov pomôcka vygeneruje poďakovanie.

SKONČIŤ ZÁZNAM

Po vygenerovaní stlačte tlačidlo „Close Application“ (Zavrieť aplikáciu).

ZAVRIEŤ APLIKÁCIU

12. Odpojte hrudný snímač, sondu a pomôcku WatchPAT® ONE.

Pre krajiny mimo USA: Pomôcku si nemusíte ponechať ani ju vrátiť. Môžete ju jednoducho zlikvidovať.

Pre USA: Ak chcete byť súčasťou programu WatchPAT® ONE Green, môžete pomôcku vrátiť pomocou priloženého štítku na vrátenie s predplateným poštovým. Po uskutočnení testu vložte pomôcku do škatule, podľa vyobrazenia nalepte na škatuľu štítk a pomôcku nám odoslať na správne spracovanie spojené s ochranou životného prostredia. Táto služba je bezplatná. Ak sa nechcete zapojiť do programu WatchPAT® ONE Green Program, pomôcku si nemusíte ponechať ani ju vrátiť. Môžete ju jednoducho zlikvidovať.