

# WatchPAT<sup>+</sup> ONE

Domači test za spalno apnejo  
za enkratno uporabo

Za video navodila po korakih obiščite

[watchpatone-howtouse.com](http://watchpatone-howtouse.com)

# WatchPAT<sup>+</sup> ONE

Domači test za spalno apnejo  
za enkratno uporabo



Če imate kakršna koli  
vprašanja, pokličite službo  
za uporabnike pri podjetju  
Itamar<sup>®</sup> Medical na številko:  
**1-888-748-2627**

## Priročnik po korakih

Skenirajte spodnjo QR kodo za  
prenos WatchPAT<sup>®</sup> ONE aplikacije



**itamar<sup>®</sup>**  
medical  
[www.itamar-medical.com](http://www.itamar-medical.com)

### Označevanje tehničnih informacij



Pozor: Zvezni zakon ZDA dovoljuje, da to napravo prodaja zgolj zdravstveni delavec z licenco ali njegov pooblaščenec



Enkratna uporaba, ne uporabljajte ponovno



Dovoljen temperaturni razpon: 0°C - 40°C



Glej navodila za uporabo

1.5V DC

Obratovalna napetost baterije

IP22

Zaščita pred vdori



Del tpa BF, ki je v stiku z bolnikom



Identifikacijska številka Zvezne komisije za komunikacijo



Proizvajalec medicinskega pripomočka



Kataloška številka



Serijska številka



Datum proizvodnje



Rok uporabnosti



V skladu z Direktivo OEEQ 2012/19/EU je treba vsa odpadna električna in elektronska oprema (EEO) zavržiti ločeno in ne odlagati z običajnimi gospodinjstvenimi odpadki. Ta izdelek in vse njegove dele odstranite na odgovoren in okolju prijazen način.



Lomljivo, uporabljajte previdno



Hranite na suhem



IC: 27705-WATCHPAT ONE Številka certifikacije ISED Kanada



HV:IN: WatchPAT ONE Določa specifikacije strojne opreme različice izdelka



Medicinski pripomoček



Japonski certifikacijski simboli

REF:DMC183682-Ed. 3

**itamar<sup>®</sup>**  
medical  
[www.itamar-medical.com](http://www.itamar-medical.com)



Pomembna opozorila:

- Skladiščna in obratovalna temperatura 0 °C - 40 °C
- Nobenega dela enote ne poskušajte priključiti ali izključiti.
- Ne poskušajte v enoto vnesti tujih predmetov.
- V nobenem primeru ne poskušajte sami odpraviti težave.
- Pripomoček WatchPAT<sup>®</sup> ONE ne sme povzročati nelagodja ali bolečine. Če občutite nevdružljivo nelagodje, pripomoček odstranite in pokličite službo za pomoč uporabnikom.
- Baterijo pred vsakršno pregledje s prostim očesom in se prepričajte, da ni odebena, razpokana, puščča ali ima kakšno drugo napako.



**Itamar Medical Ltd.**  
9 Halamish Street, PO box 3579  
Caesarea 3088900, Izrael  
T: +972-4-61177000, F: +972-4-6275598



**Arazy Group GmbH**  
The Square 12, Am Flughafen  
60549 Frankfurt am Main  
Nemčija

Za video navodila po korakih  
obiščite: [watchpatone-howtouse.com](http://watchpatone-howtouse.com)



# WatchPAT® ONE

## Domači test za spalno apnejo za enkratno uporabo

### Priročnik po korakih


Ta priročnik vas bo vodil korak za korakom in vam pokazal, kako pravilno uporabljati pripomoček za domači test za spalno apnejo WatchPAT® ONE.

#### Preden uporabite pripomoček WatchPAT® ONE:

- Priporočljivo je, da pripomoček WatchPAT® ONE namestite na svojo nedominantno roko.
- Sondo lahko nosite na kateri koli prstu, razen na palcu.
- Pred uporabo odstranite oprjeta oblačila, prstane, ure in drug nakit.
- S testnega prsta odstranite lak za nohte in umetne nohte ter poskrbite, da bo noht kratko prstrižen.

**Opomba:** Uporabljajte le alkalno baterijo tipa AAA. Baterije ne vstavljajte, dokler niste pripravljeni na spanje.

1. Preden nadaljujete s testom za spanje, se prepričajte, da imate dostop do interneta, telefon, pripomoček WatchPAT® ONE in kodo PIN.

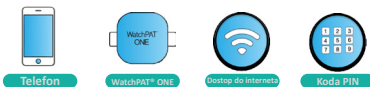

2. Prenesite aplikacijo WatchPAT® ONE na svojo mobilno napravo (na voljo v Apple App Store in Google Play Store).



3. Odprite aplikacijo WatchPAT® ONE in dajte vsa dovoljenja, ki jih zahteva aplikacija. Ta dovoljenja so potrebna za delovanje aplikacije.

Iz škatle vzemite pripomoček WatchPAT® ONE. V aplikaciji lahko kliknete gumb "Preview" (»Predogled«) za hiter ogled, kako nastaviti pripomoček.


PREDOGLLED

Ko končate, pritisnite gumb "Ready" (»Pripravljen«).

PRIPRAVLJENO

4. V pripomoček WatchPAT® ONE vstavite baterijo.

Ko končate, pritisnite "Next" (»Naprej«).

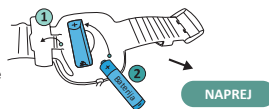

NAPREJ

5. S testne roke odstranite uro in nakit.

Ko končate, pritisnite "Next" (»Naprej«).



NAPREJ

6. Vnesite 4-mestno kodo PIN, ki ste jo dobili pri zdravniku ali pri ponudniku, in pritisnite tipko "Enter" (»Vnos«).

**VNESITE KODO PIN**  
Vnesite določeno številčno KODO PIN (osebna identifikacijska številka) in pritisnite Enter (Vnos)

VNOS

7. Pripomoček WatchPAT® ONE si nadenite na nedominantno roko. Prepričajte se, da ni nameščen niti pretesno niti preohlapno.

Ko končate, pritisnite "Next" (»Naprej«).



NAPREJ

8. Vzemite senzor prsnega koša (senzor za smrčanje in položaj telesa) in kabel povlecite notri skozi rokav in ven skozi odprtino za vrat. Odstranite jeziček z nalepke in pritrдите senzor tik pod zarezo na prsnici.

Ko končate, pritisnite "Next" (»Naprej«).



NAPREJ


\* Če vaš pripomoček WatchPAT® ONE ne vključuje senzorja prsnega koša, preskočite ta korak.

9. Prst svoje nedominantne roke potisnite do konca v sondo. Uporabite lahko kateri koli prst, razen palca. Sondo je treba vstaviti tako, da je nalepka z oznako TOP (ZGORAJ) nameščena nad nohtom.

Sondo pritisnite ob trdo podlago in počasi povlecite jeziček TOP (ZGORAJ) proti sebi, da ga odstranite iz sonde.

Ko končate, pritisnite "Next" (»Naprej«).

NAPREJ

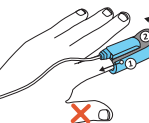

10. Sedaj ste pripravljeni. Zadnjih nekaj korakov, preden začnete s testom spanja:

- a. Prepričajte se, da je vaš telefon oddaljen največ 5 metrov od pripomočka WatchPAT® ONE.
- b. Izklopite vse druge oddajne naprave v sobi, na primer druge pametne telefone, pametne ure in slušalke, saj bi lahko motile test.
- c. Telefon priključite na polnilnik, vso noč mora ostati priključen. Če morate ponoči vstati, pustite telefon priključen, ni ga treba nositi s seboj.

Zdaj kliknite gumb "Start" (»Zagon«), s čimer boste začeli s testom spanja.

ZAGON

11. Ko se zjutraj zbudite, pritisnite gumb "End Recording" (»Končaj snemanje«) in počakajte nekaj minut, da pripomoček zaključí prenos podatkov. Po končanem prenosu podatkov boste prejeli zahvalno sporočilo.

Ko prejmete, pritisnite "Close Application" (»Zapri aplikacijo«).

KONEC SNEMANJA

ZAPRI APLIKACIJO

12. Odstranite senzor prsnega koša, sondo in pripomoček WatchPAT® ONE.

**Zunaj ZDA:** Pripomočka ni treba obdržati ali vrniti. Lahko ga preprosto zavrzete.

**Za ZDA:** Če želite sodelovati v programu WatchPAT® ONE Green, lahko napravo vrnete s priloženo predplačano nalepko za vračilo. Po končanem preskusu pripomoček vstavite v škatlo, nanjo pritrđite etiketo, kot je prikazano, in nam jo pošljite v ustrezno oddelavo za zaščito okolja. Ta storitev se ne obračuna. Če ne želite sodelovati v programu WatchPAT® ONE Green, pripomočka ni treba obdržati ali vrniti. Lahko ga preprosto zavrzete.