



מדריך מקוצר למשתמש

Watch Over Your Sleep

WatchPAT™



לסרט הדרכה לחץ על הלינק:
<http://www.itamar-medical.com/patientvideounified>

itamar medical | Health Being Made Simple

WatchPAT™ 200U



מדריך זה ינחה אותך בהרכבה ובשימוש במכשיר ה-WatchPAT בביתך. לאחר שקיבלת את הנחיות הצוות הרפואי בנוגע לתפעול המכשיר, תוכל להעזר במדריך זה.

יתכן ותדרש עזרת מבוגר.

לפני ענידת מכשיר ה-WatchPAT:


- הסר תכשיטים, שעונים וטבעות מהיד הלא דומיננטית.
- וודא שציפורני האצבעות קצוצות וחלקות.
- הסר לאק וציפורניים מלאכותיות מהיד הנבדקת.
- וודא שהיד יבשה ללא קרם ידיים.
- וודא שבגד השינה אינו צמוד לזרוע.

אל תענוד את המכשיר לפני שהנך מוכן לשנת לילה.

A – כפתור הפעלה

B – חיישן תנחות גוף ונחירות (אופציונלי)

C – אצבעון uPAT

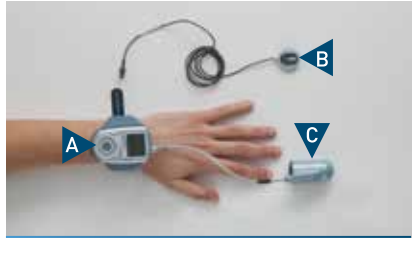

+ שלב 1 – (אופציונלי) הרכבת חיישן תנחות גוף ונחירות

אם אינך משתמש בחיישן זה נא עבור לשלב 2 בדאי לבצע שלב זה מול המראה

1. השחל את החיישן דרך השרוול עד למפתח הצוואר של חולצתך.



2. הסר את נייר המדבקה הלבן של מדבקת החיישן.



3. הדבק את החיישן מתחת לשקע הצוואר (גזור או גלח את שיער החזה אם הונחית לעשות זאת).



4. אבטח את מיקום החיישן בעזרת פלסטר רפואי.



+ שלב 2 – ענידת מכשיר ה-WatchPAT

5. ענוד את המכשיר על היד הלא דומיננטית: הפוך את המכשיר על משטח ישר, הכנס את פרק כף היד לתוך הרצועה ורכס את הרצועה.

המנע מהידוק הרצועה יתר על מידה.



+ שלב 3 – הרכבת אצבעון ה-uPAT



7. משוך והוצא את לשונית הנייר המסומנת ב-TOP מהאצבעון בעדינות ובזהירות.

6. הכנס את האצבע המורה לתוך האצבעון עד שתרגיש את קצה האצבעון (מומלץ להכניס את האצבע כנגד משטח קשיח).

+ שלב 4 – הפעלת המכשיר


8. לחץ על כפתור ההפעלה הכחול בחוזקה עד שיופיע: "Itamar Medical" על הצג.

המכשיר יבצע בדיקה קצרה ובסיומה יופיע על הצג:

Good Night!!! Time elapsed: Hours: Minutes:Recording

במקרה של בעיה יופיע על הצג: TEST ABORTED

הערה: האור במסך יבבה כעבור דקה אך ההקלטה ממשיכה. בכל פעם שתלחץ על הכפתור האור בצג יאיר למשך דקה.

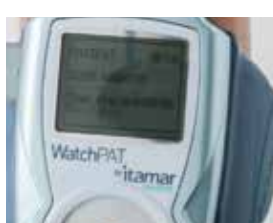

במהלך הלילה – במקרה שיש צורך לקום במהלך הלילה אין להסיר את המכשיר והחיישנים. במקרה של תחושת גירוי באצבע אשר לא ניתן להתגבר עליה, הסר את המכשיר והחיישנים והתקשר למוקד התמיכה.



+ שלב 5 – בבוקר

• לא ניתן לכבות את המכשיר ה-WatchPAT.

• הסר את המכשיר ואת החיישנים בזהירות.

• הכנס את כל חלקי המערכת חזרה למזוודה.

Watch Over Your Sleep

+ הערות חשובות

מכשיר ה-WatchPAT לא אמור לגרום להרגשת אי נוחות חריגה או כאב. במקרה וישנה תחושת אי נוחות ביד, שחרר מעט את הרצועה.

אם תחושת האי נוחות ממשיכה, אנא התקשר למוקד התמיכה.

• אין לנסות להרכיב או לנתק חלקים מהמכשיר.

• אין להכניס חפצים זרים לתוך המכשיר.

• אין לנסות לחבר את המכשיר לספק חשמל או להתקן אחר – מכשיר או מחשב.

• אין לנסות לתקן בעיות במכשיר בעצמך.

במקרה של תקלה, יש להתקשר למוקד התמיכה תוך ציון מספר התקלה שמופיע על מסך המכשיר.

שים לב: התמונות במדריך הן עבור יד שמאל; את אותן פעולות אפשר לבצע עבור יד ימין.



itamar medical

מוקד תמיכה : שלוחה 3327 04-6177000
www.itamar-medical.com info@itamar-medical.com

Itamar Medical Inc.
3290 Cumberland Club Drive
suite 100, Atlanta
Georgia 30339, USA
Tel 1 888 748 2627

איתמר מדיקל בע"מ
רח' החלמיש 9
ת.ד 3579 א.ת. צפוני קיסריה
3088900
טל. 04-6177000
פקס. 04-6275598

EC REP MEDES Ltd.
5 Beaumont Gate,
Shenley Hill,
Radlett, Hertfordshire
WD7 7AR, England
Tel: +44 208123 8056
Tel/Fax: +44 1923859810

Caution: Federal law restricts this device to sale by or on the order of a physician.

©2016. All rights reserved. WatchPAT, Itamar Medical, the Itamar Medical logo are trademarks of Itamar Medical Ltd. and may be registered in certain jurisdictions.